

PRODUCTO:

PAQUETE BASICO ESTERIL PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA

CATÁLOGO:

COB035-63

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-COB035-63

SUSTITUYE A:

Nuevo

VIGENCIA:

3 años

PROXIMA REVISIÓN:

SEP-2028

ELABORÓ:

Carolina Hernández Hernández

Carolina Hernández Hernández
Producción

FECHA: 23-SEP-2025

REVISÓ:

IQI. Sergio Bautista Sampedro

IQI. Sergio Bautista Sampedro
Coordinador de Producción

FECHA: 24-SEP-2025

AUTORIZÓ:

QFB. Yazmin Yarely Reyes Silva

QFB. Yazmin Yarely Reyes Silva
Responsable Sanitario

FECHA: 25-SEP-2025

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Ensamble		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Sabana 160 x 115 cm fenestrado hexagonal central y bolsas recolectoras	1
2	Campos plano utilitario de 90 x 90 cm	2
3	Recipiente de plástico de 8 oz	1
4	Gasas de 10 x 10 cm	5
5	Funda para mesa de mayo de 58 x 140 cm con refuerzo laminado de 50 x 60 cm	1
6	Batas gde 150 x 125 con tarjeta de transferencia	2
7	Toallas absorbentes para secado de manos de 44 x 51 cm	2
8	Cubierta para mesa de riñón 150 x 240 cm	1
9	Etiqueta de apertura con suaje autodesprendible	1
Observaciones: Descripciones especificas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Ensamble	
Descripción	Parámetros de uso
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte (cuando aplique)	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.

PRODUCTO:

PAQUETE BASICO ESTERIL PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA

CATÁLOGO:

COB035-63


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-COB035-63

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:

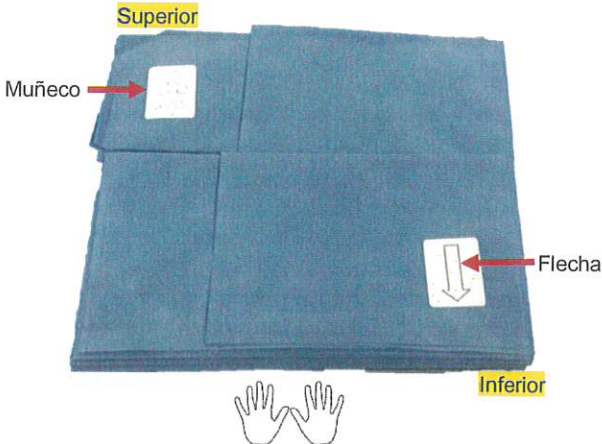1	Colocar sobre la mesa de trabajo 1 sabana 160 x 115 cm fenestrado hexagonal central y bolsas recolectoras.	2	Colocar 2 campos plano utilitario de 90 x 90 cm.
			
Criterio: Se coloca de forma horizontal con el muñeco hacia la parte superior del lado izquierdo y la flecha hacia la parte inferior del lado derecho.		Criterio: Se colocan de forma vertical, del lado izquierdo encima de la sabana 160 x 115 cm fenestrado hexagonal central y bolsas recolectoras con las costillas hacia la parte inferior.	
3	Colocar 1 recipiente de plástico de 8 oz.	4	Colocar 5 gasas de 10 x 10 cm.
			
Criterio: Se coloca en la parte superior del lado derecho, encima de la sabana 160 x 115 cm fenestrado hexagonal central y bolsas recolectoras.		Criterio: Se colocan en la parte inferior del lado derecho, encima de la sabana 160 x 115 cm fenestrado hexagonal central y bolsas recolectoras.	

PRODUCTO:

PAQUETE BASICO ESTERIL PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA

CATÁLOGO:

COB035-63

VERSIÓN:


01

CÓDIGO:

IEPR-COB035-63

5 Colocar 1 funda para mesa de mayo de 58 x 140 cm con refuerzo laminado de 50 x 60 cm.	6 Colocar 1 bata gde 150 x 125 con tarjeta de transferencia.
	
Criterio: Se coloca del lado izquierdo encima de los campos plano utilitario de 90 x 90 cm.	Criterio: Se coloca del lado derecho encima del recipiente de plástico de 8 oz y las gasas de 10 x 10 cm con la abertura hacia el lado derecho y el cuello hacia la parte superior.
7 Colocar 1 toalla absorbente para secado de manos de 44 x 51 cm.	8 Colocar 1 bata gde 150 x 125 con tarjeta de transferencia.
	
Criterio: Se coloca del lado derecho encima de la bata gde 150 x 125 con tarjeta de transferencia.	Criterio: Se coloca una segunda bata del lado izquierdo encima de la funda para mesa de mayo de 58 x 140 cm con refuerzo laminado de 50 x 60 cm, un poco encimada a la primera con la abertura hacia el lado izquierdo y el cuello hacia la parte superior.

PRODUCTO:					
PAQUETE BASICO ESTERIL PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA					
CATÁLOGO:	COB035-63	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IEPR-COB035-63

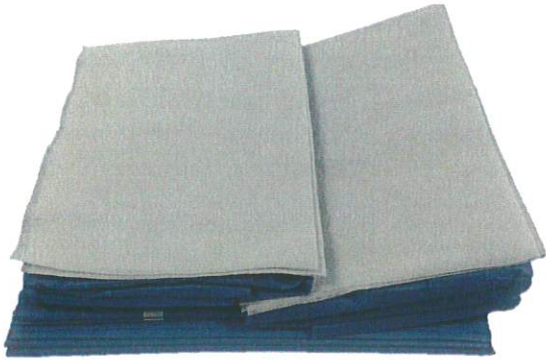9	Colocar 1 toalla absorbente para secado de manos de 44 x 51 cm.	10	Producto terminado de ensamblar.
 		VISTA FRONTAL  	
Criterio:	Se coloca una segunda toalla del lado izquierdo encima de la bata gde 150 x 125 con tarjeta de transferencia.	Criterio:	Como se muestra en la imagen.

11	En otra mesa de trabajo se acomodan 2 personas para envolver.	12	Sobre la mesa de trabajo se acomoda la cubierta para mesa de riñón 150 x 240 cm.
PERSONA A  PERSONA B 		PERSONA A  PERSONA B 	
Criterio:	N/A.	Criterio:	La cubierta para mesa de riñón se acomoda verticalmente sobre la mesa, el largo de la cubierta cuelga de la mesa.

PRODUCTO:

PAQUETE BASICO ESTERIL PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA

CATÁLOGO:

COB035-63


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-COB035-63



- 13 Se acomoda el equipo a envolver.

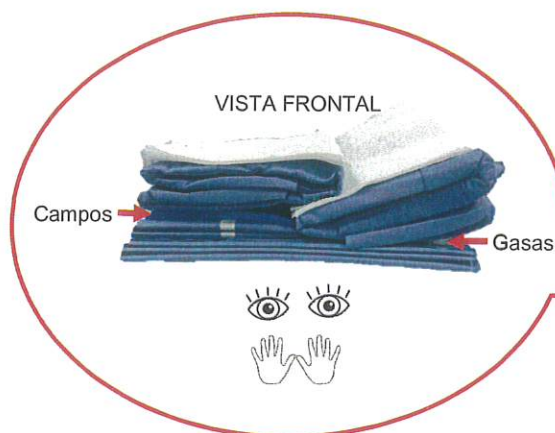

Criterio:

El material ensamblado se acomoda sobre la mesa encima de la cubierta para mesa de riñón de manera que el recipiente y las gasas queden hacia la persona B.

- 14 La persona A comienza a envolver.
La persona A levanta los extremos de la cubierta para mesa de riñón marcando un doblez a la mitad cubriendo el paquete, mientras la persona B sujeta el paquete ensamblado.

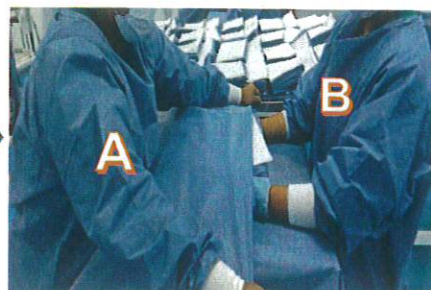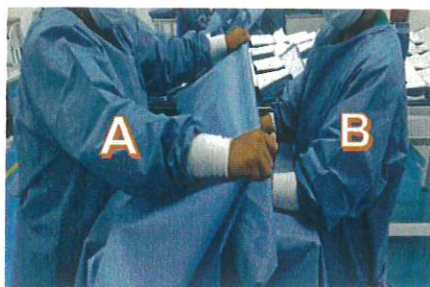

Criterio:

Apretar el equipo con la cubierta para mesa de riñón.

PRODUCTO:

PAQUETE BASICO ESTERIL PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA

CATÁLOGO:

COB035-63


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR-COB035-63

- 15 La persona A hace un segundo dobles levanta los extremos de la cubierta para mesa de riñón marcando un dobles a la mitad formando una pestaña y cubriendo el paquete por completo.

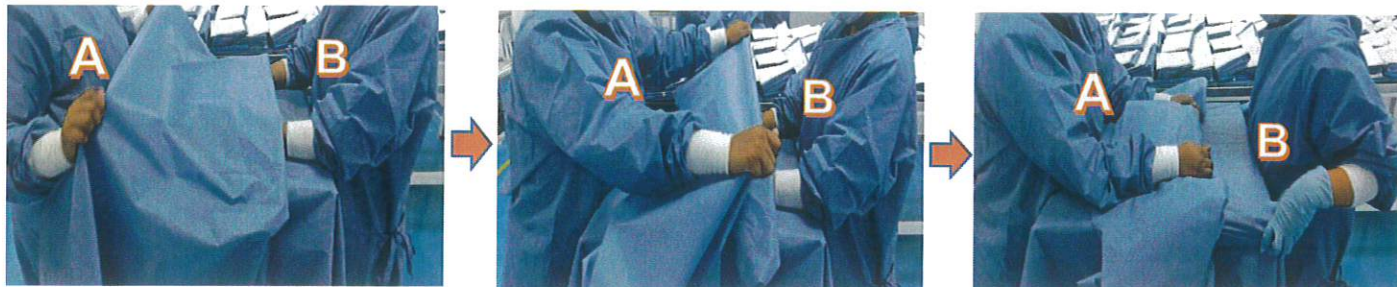

Criterio: Apretar el equipo con la cubierta para mesa de riñón.

- 16 La persona B levanta los extremos de la cubierta para mesa de riñón marcando un dobles a la mitad cubriendo el paquete, mientras la persona A sujeta el paquete.

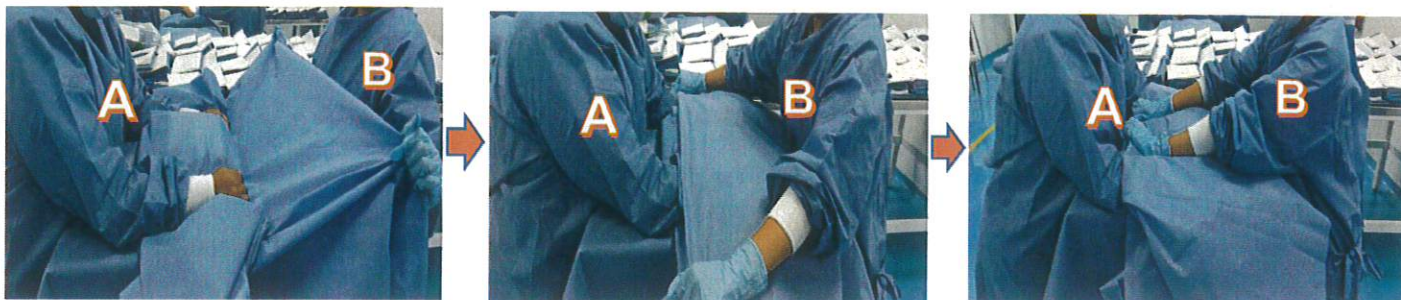

Criterio: Apretar el equipo con la cubierta para mesa de riñón.

PRODUCTO:

PAQUETE BASICO ESTERIL PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA

CATÁLOGO:

COB035-63

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR-COB035-63

- 17 La persona B hace un segundo dobles levanta los extremos de la cubierta para mesa de riñón marcando un dobles a la mitad formando una pestaña y cubriendo el paquete por completo mientras la persona A sujeta el paquete.



Criterio: Apretar el equipo con la cubierta para mesa de riñón.

- 18 La persona A y B giran el paquete a un ángulo de 90° hacia la izquierda tomando la dirección de la persona B.

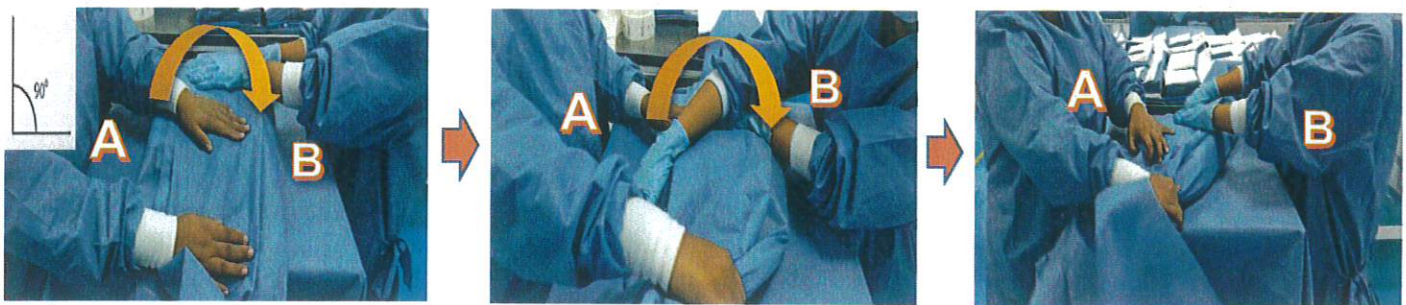

Criterio: Durante la manipulación se debe procurar que en cada dobles quede apretado, para que no se desenvuelva ni quede holgado o flojo.

PRODUCTO:

PAQUETE BASICO ESTERIL PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA

CATÁLOGO:

COB035-63

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR-COB035-63

- 19 La persona A y B acomodan los dobleces marcados en todas las pestañas de la cubierta (planchar cubierta).



Criterio: Durante la manipulación se debe procurar que en cada doblez quede apretado, para que no se desenvuelva ni quede holgado o flojo.

- 20 La persona A realiza el doblez de ambos puntos 1 y 2 dando un pequeño doblez hacia dentro, formando una pestaña triangular.

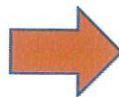

Criterio: No soltar los dobleces realizados, procurar que no se desenvuelva ni quede holgado o flojo.

PRODUCTO:

PAQUETE BASICO ESTERIL PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA

CATÁLOGO:

COB035-63

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR-COB035-63

- 21 La persona A dobla a la mitad la pestaña triangular, después levanta hacia arriba con dirección a la persona B cubriendo el paquete, mientras la persona B ayuda jalando de los extremos para apretar.



Criterio: No soltar los dobleces realizados, procurar que no se desenvuelva ni quede holgado o flojo.

- 22 La persona B realiza el doblez de ambos puntos 1 y 2 dando un pequeño doblez hacia dentro, formando una pestaña triangular.

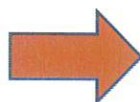

Criterio: No soltar los dobleces realizados, procurar que no se desenvuelva ni quede holgado o flojo.

PRODUCTO:

PAQUETE BASICO ESTERIL PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA

CATÁLOGO:

COB035-63

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR-COB035-63

- 23 La persona B dobla a la mitad la pestaña triangular, sobre esa pestaña hace un segundo dobles exactamente a la mitad.



Criterio: No soltar los dobleces realizados, procurar que no se desenvuelva ni quede holgado o flojo.

- 24 La persona B hace un tercer dobles, levanta hacia arriba con dirección a la persona A cubriendo una parte del paquete, mientras la persona A ayuda jalando de los extremos para apretar.

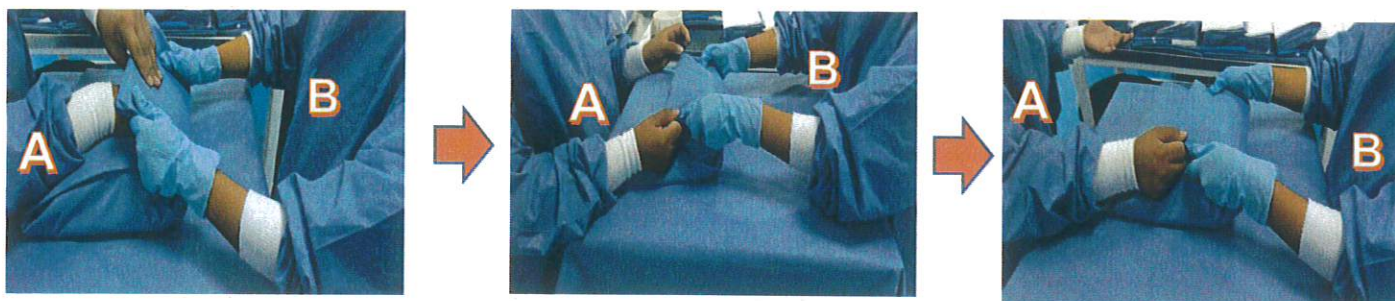

Criterio: No soltar los dobleces realizados, procurar que no se desenvuelva ni quede holgado o flojo.

PRODUCTO:

PAQUETE BASICO ESTERIL PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA

CATÁLOGO:


COB035-63

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-COB035-63

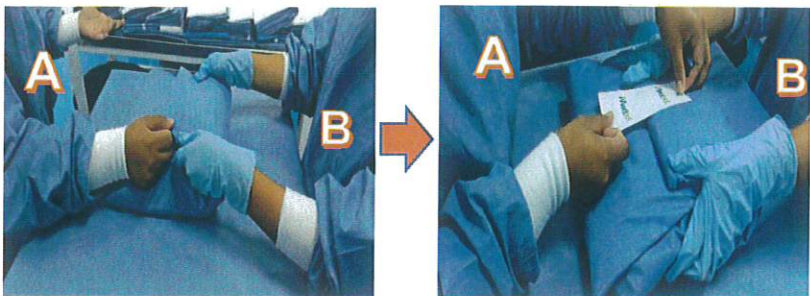25	La persona B detiene el paquete mientras que la persona A coloca la etiqueta de apertura con suaje autodesprendible.	26	Presentación final de la envoltura del paquete.
			
Criterio:	La etiqueta se coloca de tal manera que la persona A lea las leyendas de la etiqueta. Al pegar la etiqueta el suaje debe de quedar justo donde se intersectan las dos pestañas, y no soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desenvuelva.	Criterio:	El paquete envuelto no debe quedar flojo ni holgado.


4. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A

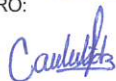PRODUCTO:
PAQUETE BASICO ESTERIL PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA
CATÁLOGO:
COB035-63
VERSIÓN:
01
CÓDIGO:
IAPS-COB035-63
SUSTITUYE A:
VIGENCIA:
PROXIMA REVISIÓN:
Nuevo
3 años
SEP-2028
ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:


Carolina Hernández Hernández

Producción

 FECHA: **23-SEP-2025**

IQI. Sergio Bautista Sampedro

Coordinador de Producción

 FECHA: **24-SEP-2025**

QFB. Yazmin Yarely Reyes Silva

Responsable Sanitario

 FECHA: **25-SEP-2025**
1. INSUMOS REQUERIDOS:

Acondicionamiento Primario		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Bolsa de polipapel impresa	1
2	Etiqueta primaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización	1
Acondicionamiento Secundario		
1	Caja doble corrugado 57x45x33 cm	1
2	Etiqueta secundaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Acondicionamiento Primario	
Descripción	Parámetros de uso
Selladora magneta	Tiempo de sellado: 3 a 9 seg. Tiempo de enfriamiento: 3 a 9 seg.
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.
Despachador de cinta indicadora de esterilización (opcional el uso de tijeras)	20 mm en modo automático o semiautomático, limpio y libre de contaminación.
Acondicionamiento Secundario	
Descripción	Parámetros de uso
Despachador de cinta indicadora de esterilización (opcional el uso de tijeras)	20 mm en modo automático o semiautomático, limpio y libre de contaminación.
Máquina precintadora	46 cm de ancho x 34 cm de altura

PRODUCTO:

PAQUETE BASICO ESTERIL PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA

CATÁLOGO:

COB035-63


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-COB035-63

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO:

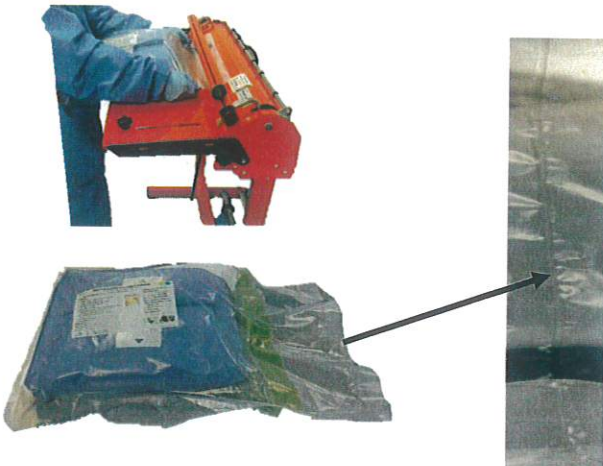1	Etiquetar el empaque primario (bolsa).	2	Introducir el producto dentro del empaque primario.
			
Criterio:	La etiqueta debe de estar libre de cualquier daño que afecte su legibilidad como arrugas, pliegues o cortaduras se coloca de forma horizontal. Nota: Verificar que contenga la cinta indicadora de esterilización.	Criterio:	Se introduce el paquete como se muestra en la imagen.
3	Sellar el empaque primario.	4	Almacenar en los contenedores.
			
Criterio:	No debe contener pliegues, perforaciones, burbujas, arrugas o interrupciones en el sello que pongan en riesgo la esterilidad del producto.	Criterio:	Para la manipulación y transporte.

PRODUCTO:

PAQUETE BASICO ESTERIL PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA

CATÁLOGO:

COB035-63

VERSIÓN:

01


CÓDIGO:

IAPS-COB035-63

4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO:

1	Empacar como se muestra en la imagen.	2	Sellar la caja con la máquina precintadora.
			
Criterio:	Colocar en dos columnas y laterales, y empacar la cantidad conforme al factor de empaque.	Criterio:	Como se muestra en la imagen.

3	Colocar etiqueta secundaria al frente con la cinta indicadora de esterilización. En caso de tratarse de una caja parcial, colocar la etiqueta de "restos-caja parcial" en esquina superior derecha. Colocar sello en la parte inferior derecha del empaque secundario.
---	--

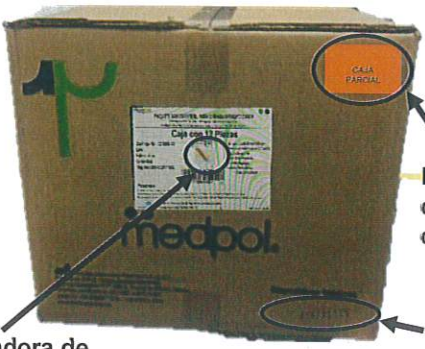

Identificación de etiqueta caja parcial

Cinta indicadora de esterilización

Sello

Formato de sello

COD DD MM AA

COD: Código de la máquina.

DD: DIA
Los 2 dígitos del día.

MM: MES
Los 2 dígitos del mes.

AA: AÑO
Últimos 2 dígitos del año.

029040425

EJEMPLO

Criterio:	El sello indica los últimos 3 dígitos de la máquina, así como el día, mes y año en que se realizó el acondicionamiento. La etiqueta no debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar como se muestra la imagen.
-----------	---

PRODUCTO:

PAQUETE BASICO ESTERIL PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA

CATÁLOGO:

COB035-63


VERSIÓN:

01


CÓDIGO:

IAPS-COB035-63

- 4 Estibar conforme a la imagen: máximo 6 camas. Seis camas con 4 cajas cada una.

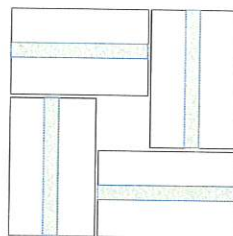

Cama 1

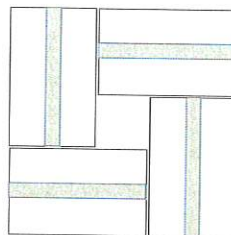

Cama 2

Criterio: ESTIBA: T-100 cm x120 cm.

5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Empaque primario frágil manipular con cuidado.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A