

PRODUCTO:

PAQUETE PARA PARTO

CATÁLOGO:

PPP035-53

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-PPP035-53

SUSTITUYE A:

VIGENCIA:

PROXIMA REVISIÓN:

Nuevo

3 años

SEP-2028

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

Carolina Hernández Hernández

Carolina Hernández Hernández

Producción

FECHA: 09-SEP-2025

Sergio Bautista Sampedro

IQI. Sergio Bautista Sampedro

Coordinador de Producción

FECHA: 10-SEP-2025

Yarely Reyes Silva

QFB. Yarely Reyes Silva

Responsable Sanitario

FECHA: 11-SEP-2025

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Ensamble		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Sabana suave para recibir producto de material absorbente con un tamaño de 100 cm x 95 cm +/- 10 cm	1
2	Campo inferior impermeable con un tamaño de 105 x 115 cm con bolsa recolectora de fluidos con capacidad de 1 a 2 litros en forma triangular con estructura flexible para evitar el desbordamiento de líquidos con válvula de drenado con refuerzo de material absorbente con medidas de 105 x 25 cm +/- 5 cm en la orilla superior del lado donde se ubique la bolsa recolectora	1
3	Sabana abdominal con un tamaño de 155 x 130 cm +/- 10 cm con adhesivo	1
4	Piñeras con un tamaño de 120 cm x 140 cm +/- 10 cm	2
5	Campos medidas 110 x 110 cm con tira adhesiva	4
6	Funda impermeable reforzada para charola mayo medidas 60 x 140 cm +/- 5 cm	1
7	Batas para cirujano unitalla con refuerzo impermeable en la parte frontal y mangas, dos toallas absorbentes para manos	2
8	Cubierta para mesa de riñón reforzada al centro de 250 x 160 cm +/- 10 cm	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Ensamble	
Descripción	Parámetros de uso
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte (cuando aplique)	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.

PRODUCTO:

PAQUETE PARA PARTO

CATÁLOGO:

PPP035-53

VERSIÓN:



01

CÓDIGO:

IEPR-PPP035-53

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:

1	Colocar sobre la mesa de trabajo 1 sabana suave para recibir producto de material absorbente con un tamaño de 100 cm x 95 cm +/- 10 cm.	2	Colocar 1 campo inferior impermeable con un tamaño de 105 x 115 cm.
			
Criterio:	Se coloca con la costilla hacia la parte superior.	Criterio:	Se coloca encima de la sabana suave para recibir producto de material absorbente de forma horizontal con el muñeco hacia la parte inferior derecha y la flecha hacia la parte inferior izquierda.

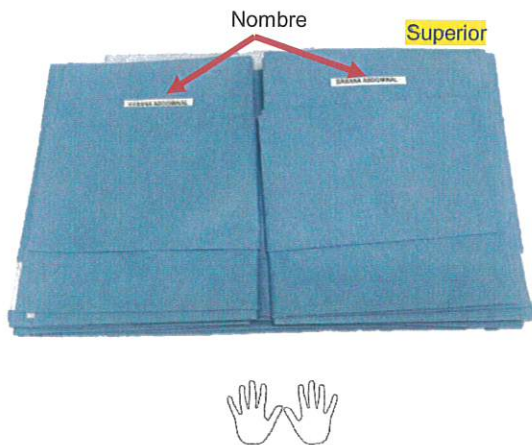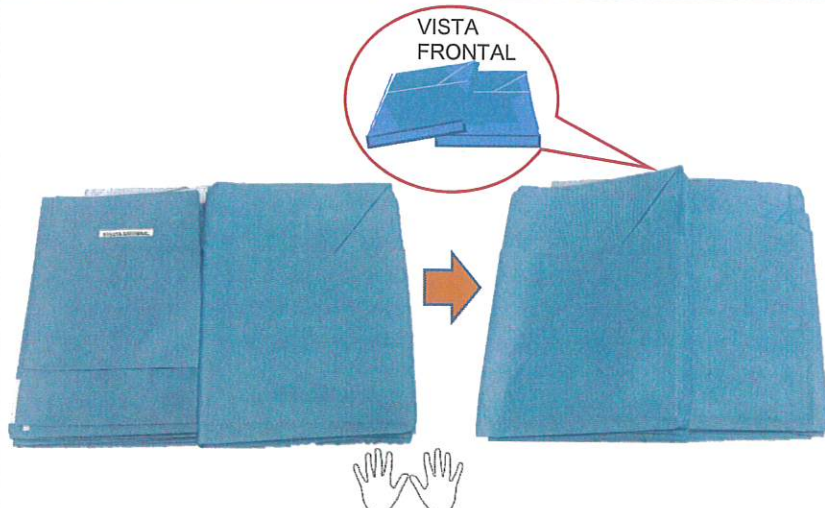3	Colocar 1 sabana abdominal con un tamaño de 155 x 130 cm +/- 10 cm con adhesivo.	4	Colocar 2 pierneras con un tamaño de 120 cm x 140 cm +/- 10 cm.
			
Criterio:	Se coloca encima del campo inferior impermeable de forma horizontal con los nombres hacia la parte superior.	Criterio:	Se colocan encima de la sabana abdominal, la primera se coloca del lado derecho y la segunda del lado izquierdo un poco encimada a la primera.

PRODUCTO:

PAQUETE PARA PARTO

CATÁLOGO:

PPP035-53

VERSIÓN:


01

CÓDIGO:

IEPR-PPP035-53

5 Colocar 4 campos medidas 110 x 110 cm con tira adhesiva.


6 Colocar 1 funda impermeable reforzada para charola mayo medidas 60 x 140 cm +/- 5 cm.

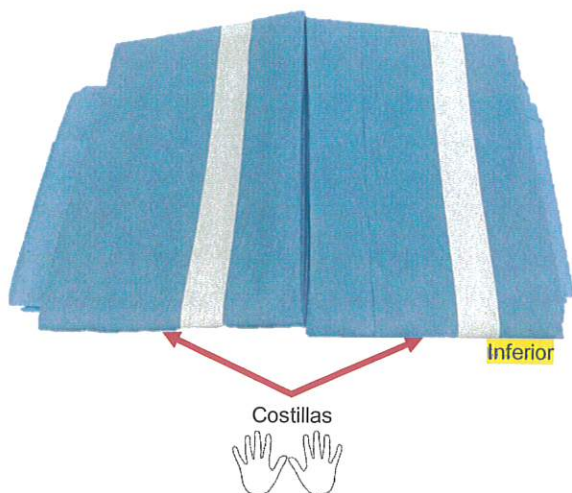

Criterio: Se colocan encima de las dos pierneras dividida en dos partes con las costillas hacia la parte inferior.

Criterio: Se coloca encima y en medio de los campos.

7 Colocar 1 bata para cirujano unitalla con refuerzo impermeable en la parte frontal y mangas, con 1 toalla absorbente para manos.

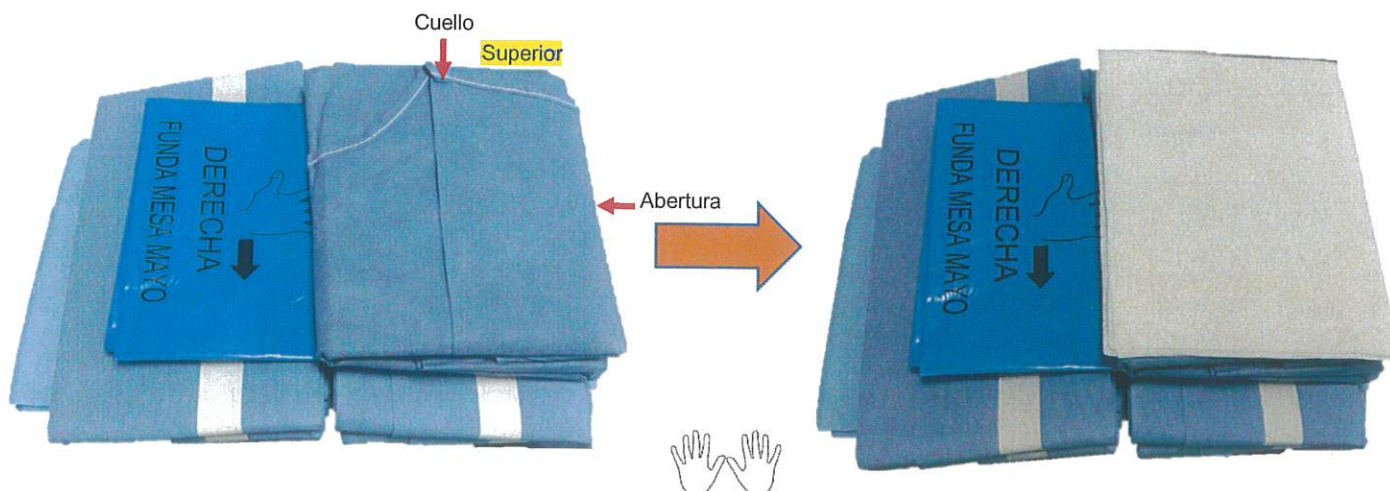

Criterio: Se coloca encima y a mitad de la funda impermeable reforzada para charola mayo del lado derecho con la abertura hacia el lado derecho y el cuello hacia la parte superior, enseguida se coloca una toalla absorbente para manos.

PRODUCTO:

PAQUETE PARA PARTO

CATÁLOGO:

PPP035-53


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-PPP035-53

- 9 Colocar 1 bata para cirujano unitalla con refuerzo impermeable en la parte frontal y mangas, con 1 toalla absorbente para manos.

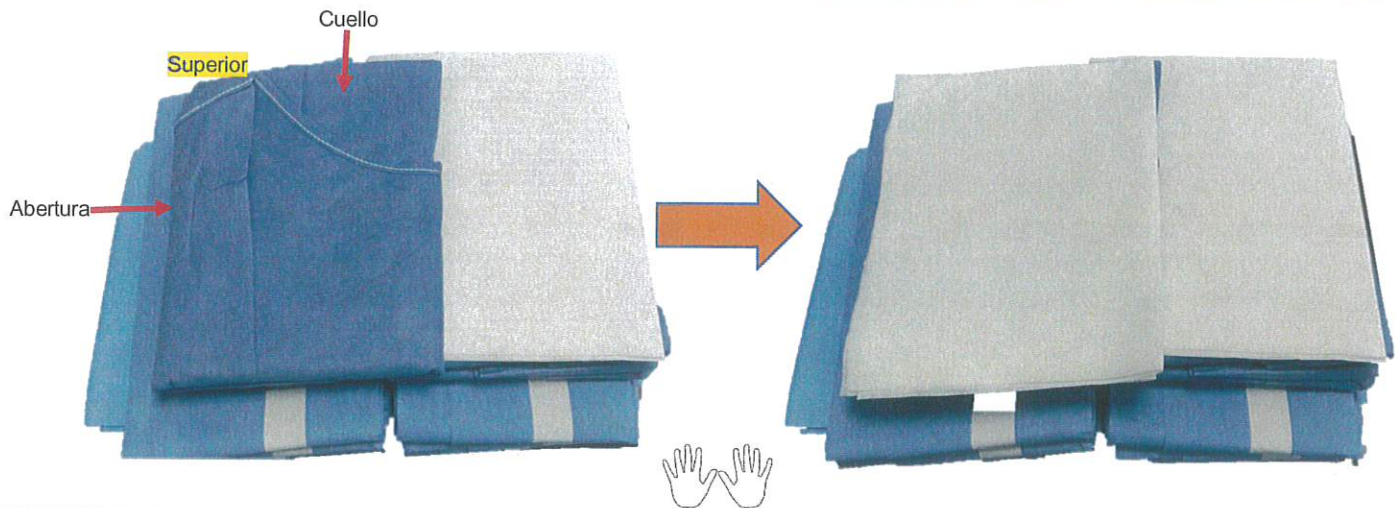

Criterio:

Se coloca una segunda bata encima y a mitad de la otra parte de la funda impermeable reforzada para charola mayo del lado izquierdo con la abertura hacia el lado izquierdo y el cuello hacia la parte superior, enseguida se coloca una segunda toalla absorbente para manos.

- 9 Producto terminado de ensamblar.


VISTA LATERAL IZQUIERDA



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL DERECHA

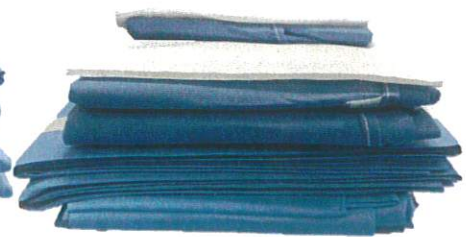

Criterio:

Como se muestra en la imagen.


innplast 
 COPIA CONTROLADA

No. 1

PRODUCTO:

PAQUETE PARA PARTO

CATÁLOGO:


PPP035-53


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-PPP035-53

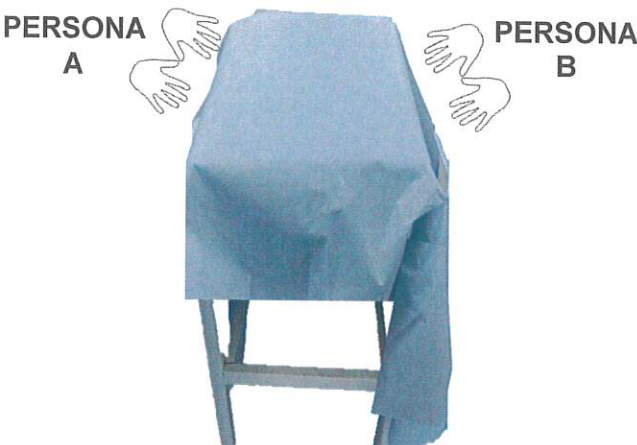11	En otra mesa de trabajo se acomodan 2 personas para envolver.	12	Sobre la mesa de trabajo se acomoda la cubierta para mesa de riñón reforzada.
PERSONA A  PERSONA B		PERSONA A  PERSONA B	
Criterio:	N/A.	Criterio:	La cubierta para mesa de riñón reforzada se acomoda verticalmente sobre la mesa, el largo de la cubierta cuelga de la mesa.

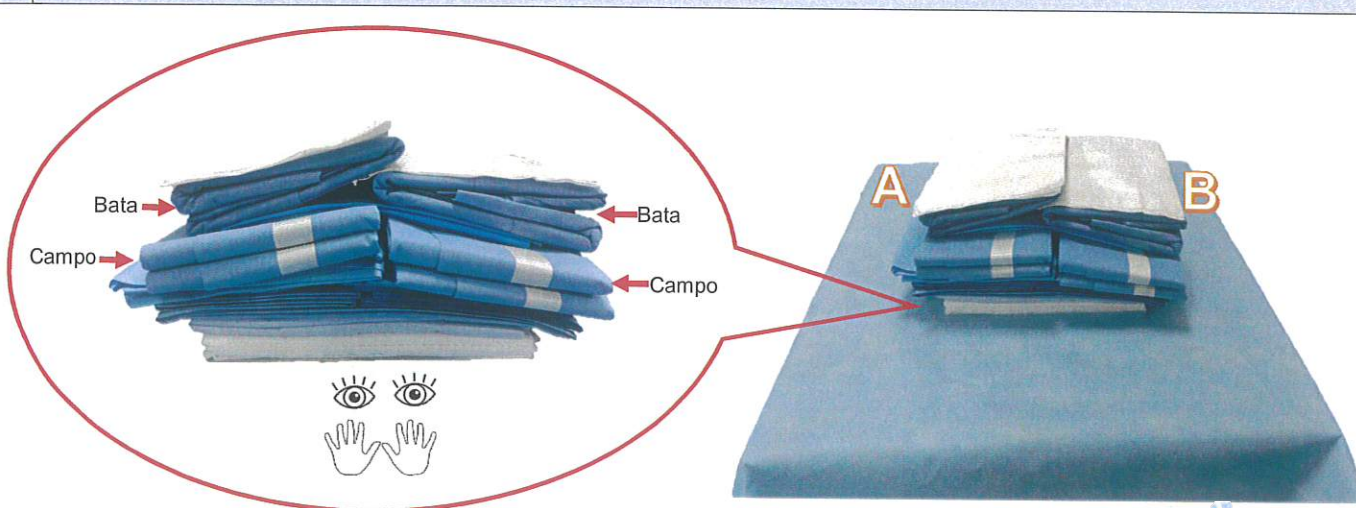13	Se acomoda el equipo a envolver.
	
Criterio:	El material ensamblado se acomoda sobre la mesa encima de la cubierta para mesa de riñón reforzada de manera que una abertura de la bata quede hacia la persona A y la otra abertura hacia la persona B.

PRODUCTO:

PAQUETE PARA PARTO

CATÁLOGO:

PPP035-53

VERSIÓN:

01


CÓDIGO:

IEPR-PPP035-53

14

La persona A comienza a envolver.

La persona A levanta los extremos de la cubierta para mesa de riñón reforzada marcando un doblez a la mitad cubriendo el paquete, mientras la persona B sujeta el paquete ensamblado.

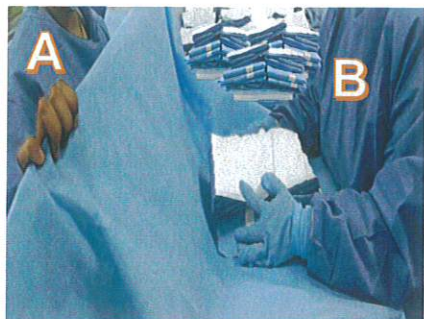


Criterio:

Apretar el equipo con la cubierta para mesa de riñón reforzada.

15

La persona A hace un segundo dobles levanta los extremos de la cubierta para mesa de riñón reforzada marcando un dobles a la mitad formando una pestaña y cubriendo el paquete por completo.

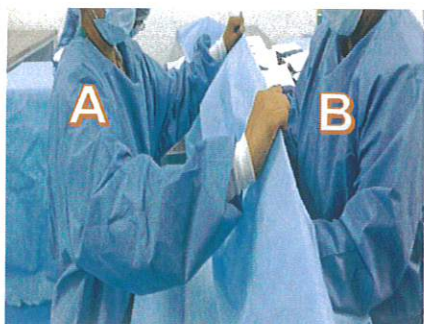

Criterio:

Apretar el equipo con la cubierta para mesa de riñón reforzada.

 
COPIA CONTROLADA

No. 1

PRODUCTO:

PAQUETE PARA PARTO

CATÁLOGO:

PPP035-53

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-PPP035-53

16

La persona B levanta los extremos de la cubierta para mesa de riñón reforzada marcando un doblez a la mitad cubriendo el paquete, mientras la persona A sujeta el paquete.



Criterio:

Apretar el equipo con la cubierta para mesa de riñón reforzada.

17

La persona B hace un segundo dobles levanta los extremos de la cubierta para mesa de riñón reforzada marcando un doblez a la mitad formando una pestaña y cubriendo el paquete por completo mientras la persona A sujeta el paquete.



Criterio:

Apretar el equipo con la cubierta para mesa de riñón reforzada.

PRODUCTO:

PAQUETE PARA PARTO

CATÁLOGO:

PPP035-53

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR-PPP035-53

- 18 La persona A y B giran el paquete a un ángulo de 90° hacia la izquierda tomando la dirección de la persona B.



Criterio: Durante la manipulación se debe procurar que en cada doblez quede apretado, para que no se desenvuelva ni quede holgado o flojo.

- 19 La persona A y B acomodan los dobleces marcados en todas las pestañas de la cubierta (planchar cubierta).

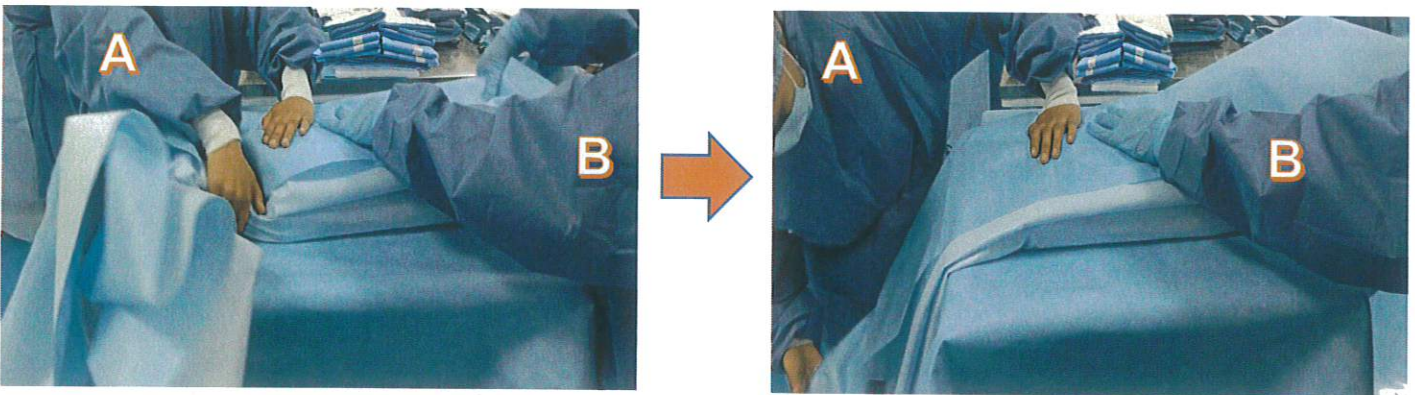

Criterio: Durante la manipulación se debe procurar que en cada doblez quede apretado, para que no se desenvuelva ni quede holgado o flojo.

PRODUCTO:

PAQUETE PARA PARTO

CATÁLOGO:

PPP035-53


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR-PPP035-53

- 20 La persona A realiza el doblez de ambos puntos 1 y 2 dando un pequeño doblez hacia dentro, formando una pestaña triangular.

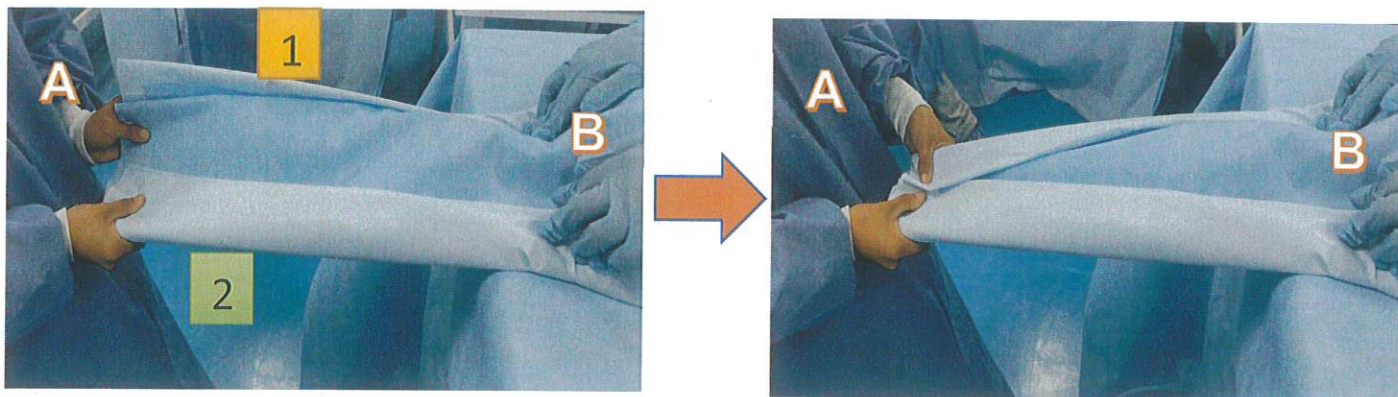

Criterio: No soltar los dobleces realizados, procurar que no se desenvuelva ni quede holgado o flojo.

- 21 La persona A dobla a la mitad la pestaña triangular, después levanta hacia arriba con dirección a la persona B cubriendo el paquete, mientras la persona B ayuda jalando de los extremos para apretar.

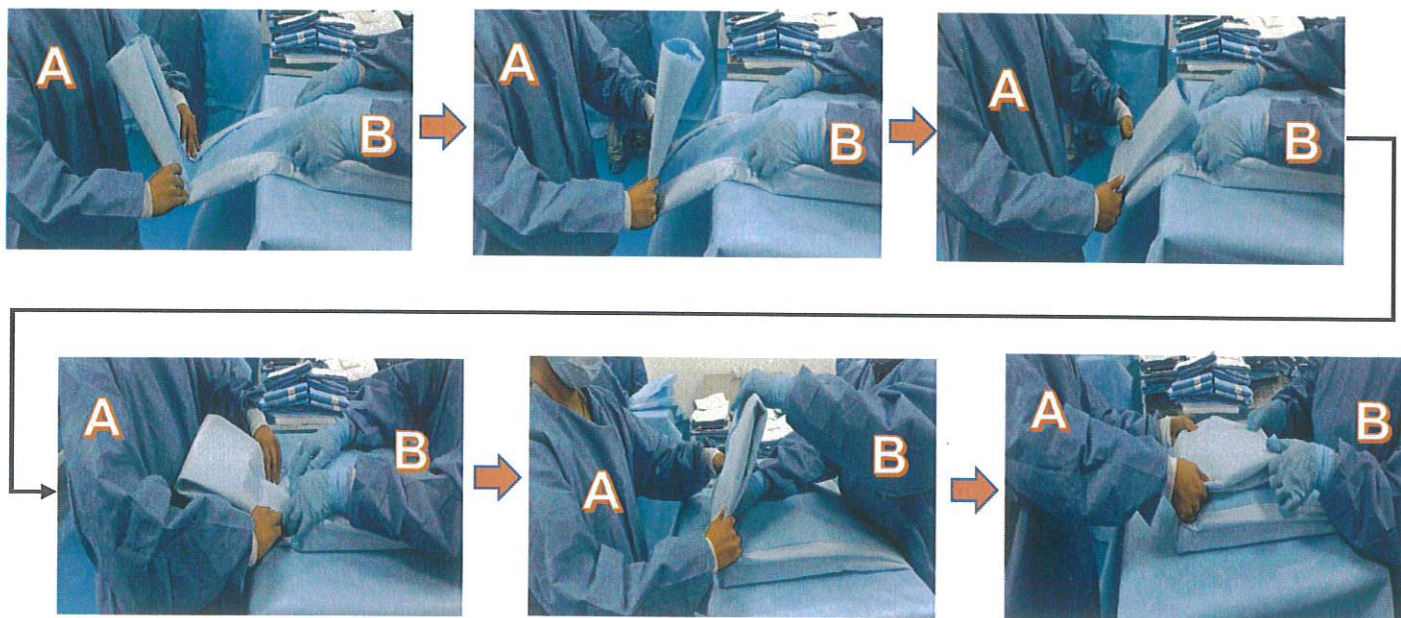

Criterio: No soltar los dobleces realizados, procurar que no se desenvuelva ni quede holgado o flojo.

PRODUCTO:

PAQUETE PARA PARTO

CATÁLOGO:

PPP035-53


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR-PPP035-53

- 22 La persona B realiza el doblez de ambos puntos 1 y 2 dando un pequeño doblez hacia dentro, formando una pestaña triangular.

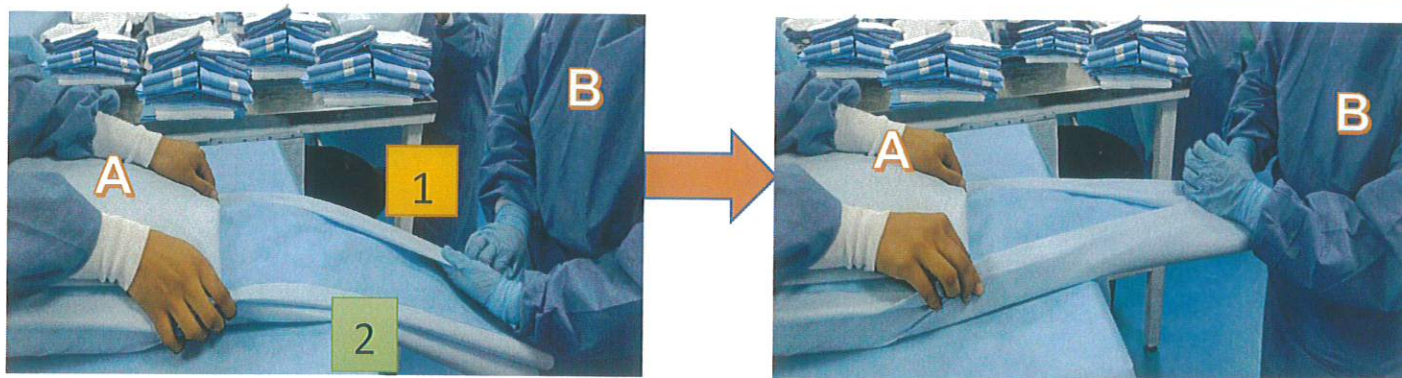

Criterio: No soltar los dobleces realizados, procurar que no se desenvuelva ni quede holgado o flojo.

- 23 La persona B dobla a la mitad la pestaña triangular, sobre esa pestaña hace un segundo doble exactamente a la mitad.

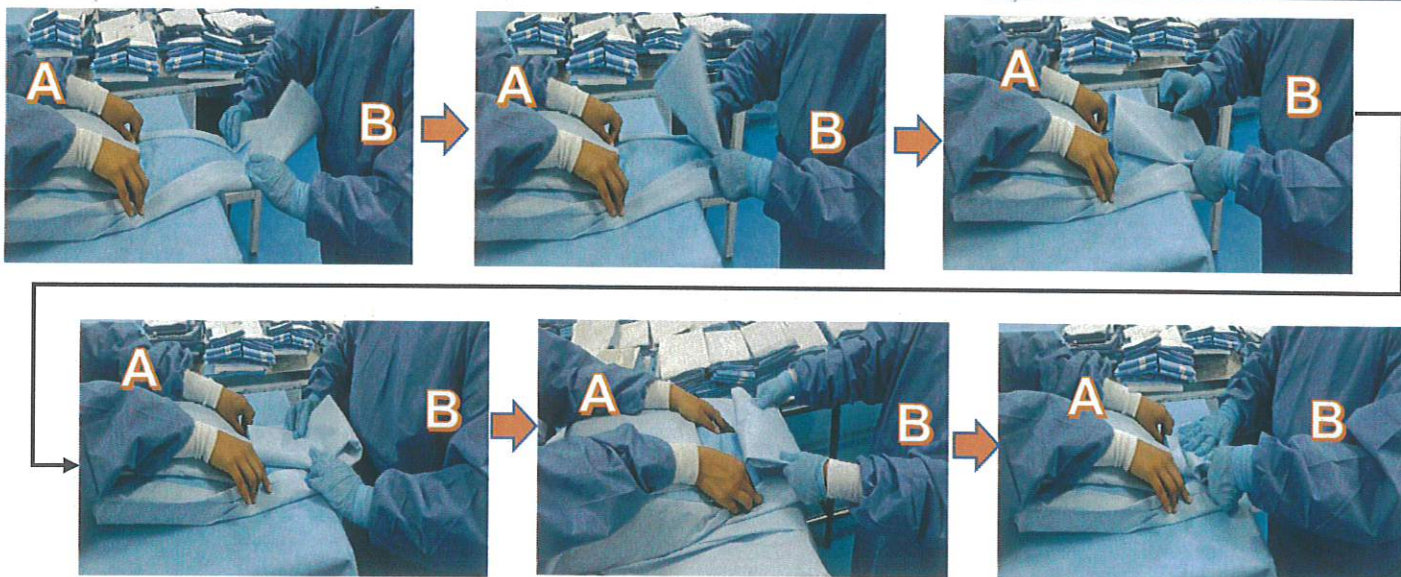

Criterio: No soltar los dobleces realizados, procurar que no se desenvuelva ni quede holgado o flojo.

PRODUCTO:

PAQUETE PARA PARTO

CATÁLOGO:

PPP035-53

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-PPP035-53


- 24 La persona B hace un tercer doble, levanta hacia arriba con dirección a la persona A cubriendo una parte del paquete, mientras la persona A ayuda jalando de los extremos para apretar.



Criterio: No soltar los dobleces realizados, procurar que no se desenvuelva ni quede holgado o flojo.

- 25 La persona B detiene el paquete mientras que la persona A coloca la etiqueta de apertura con suaje autodesprendible.

- 26 Presentación final de la envoltura del paquete.

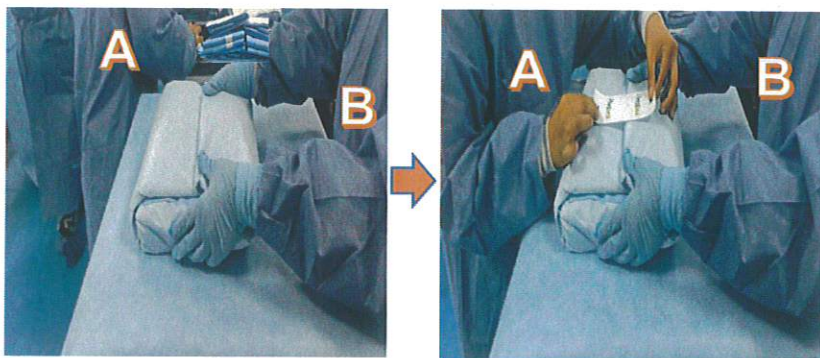

Criterio: La etiqueta se coloca de tal manera que la persona A lea las leyendas de la etiqueta. Al pegar la etiqueta el suaje debe de quedar justo donde se intersectan las dos pestañas, y no soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desenvuelva.

Criterio: El paquete envuelto no debe quedar flojo ni holgado.



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO

PRODUCTO:

PAQUETE PARA PARTO

CATÁLOGO:

PPP035-53

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-PPP035-53

4. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A


innplast 
COPIA CONTROLADA
No. 1

PRODUCTO:

PAQUETE PARA PARTO

CATÁLOGO:

PPP035-53

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-PPP035-53

SUSTITUYE A:

VIGENCIA:

PROXIMA REVISIÓN:

Nuevo

3 años

SEP-2028

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:



Carolina Hernández Hernández

Producción

FECHA: 09-SEP-2025

IQI. Sergio Bautista Sampedro

Coordinador de Producción

FECHA: 10-SEP-2025

QFB. Yazmin Yarely Reyes Silva

Responsable Sanitario

FECHA: 11-SEP-2025

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Acondicionamiento Primario		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Bolsa mixta para esterilizar	1
2	Etiqueta primaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización (cuando aplique)	1
Acondicionamiento Secundario		
1	Caja doble corrugado 57x45x33 cm	1
2	Etiqueta secundaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Acondicionamiento Primario	
Descripción	Parámetros de uso
Selladora de banda	180°C a 200°C
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.
Despachador de cinta indicadora de esterilización (cuando aplique)	20 mm en modo automático o semiautomático

Acondicionamiento Secundario	
Descripción	Parámetros de uso
Despachador de cinta indicadora de esterilización (opcional el uso de tijeras)	20 mm en modo automático o semiautomático
Contenedores de manipulación y transporte	Limpios y libre de contaminación
Máquina precintadora	46 cm de ancho x 34 de altura

PRODUCTO:

PAQUETE PARA PARTO

CATÁLOGO:

PPP035-53

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-PPP035-53

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO:

1	Etiquetar el empaque primario (bolsa).	2	Introducir el producto dentro del empaque primario.
			
Criterio: La etiqueta debe de estar libre de cualquier daño que afecte su legibilidad como arrugas, pliegues o cortaduras se coloca de forma horizontal. Nota: la cinta indicadora de esterilización se coloca cuando sea requerido.		Criterio: Se introduce el paquete como se muestra en la imagen.	
3	Sellar el empaque primario.	4	Almacenar en los contenedores.
			
Criterio: No debe contener pliegues, perforaciones, burbujas, arrugas o interrupciones en el sello que pongan en riesgo la esterilidad del producto.		Criterio: Para la manipulación y transporte.	

PRODUCTO:

PAQUETE PARA PARTO

CATÁLOGO:

PPP035-53

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-PPP035-53

4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO:

1	Empacar como se muestra en la imagen.	2	Sellar la caja con la máquina precintadora.
			
Criterio:	Colocar de frente vs frente en dos columnas, colocar en los laterales, y empacar la cantidad conforme al factor de empaque.	Criterio:	Como se muestra en la imagen.

3	Colocar etiqueta secundaria al frente con la cinta indicadora de esterilización. En caso de tratarse de una caja parcial, colocar la etiqueta de "restos-caja parcial" en esquina superior derecha. Colocar sello en la parte inferior derecha del empaque secundario.
 Etiqueta de identificación caja parcial Sello Cinta indicadora de esterilización Formato de sello COD DD MM AA COD: Código de la máquina. DD: DIA Los 2 dígitos del día. MM: MES Los 2 dígitos del mes. AA: AÑO Últimos 2 dígitos del año. 029040425 EJEMPLO	
Criterio:	El sello indica los últimos 3 dígitos de la máquina, así como el día, mes y año en que se realizó el acondicionado. La etiqueta no debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar como se muestra la imagen.

PRODUCTO:
PAQUETE PARA PARTO
CATÁLOGO:

PPP035-53


VERSIÓN:

01


CÓDIGO:

IAPS-PPP035-53

- 4 Estibar conforme a la imagen: máximo 6 camas. Seis camas con 4 cajas cada una.

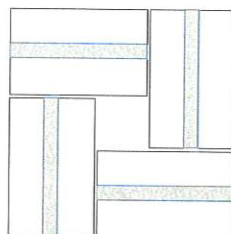

Cama 1

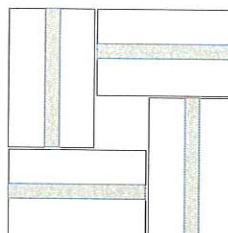

Cama 2

Criterio:

ESTIBA: T-100 cm x120 cm.

5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Empaque primario frágil manipular con cuidado.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A