

PRODUCTO:

TIJERA Y PINZA

CATÁLOGO:

ETP001-51

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- ETP001-51

SUSTITUYE A:

VIGENCIA:

PROXIMA REVISIÓN:

Nuevo

3 años

OCT- 2028

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:



Carolina Hernández Hernández

Producción

FECHA: 14-OCT-2025



Iqil Sergio Bautista Sampedro

Coordinador de Producción

FECHA: 15-OCT-2025



QFB. Yazmin Yarely Reyes Silva

Responsable Sanitario

FECHA: 16-OCT-2025

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Ensamble		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Charola termoformada	1
2	Sobre con aplicador (es) con alcohol isopropilico al 70 %	1
3	Gasa de 5 x 5 cm	1
4	Tijera iris recta	1
5	Pinza de disección sin dientes	1
6	Envoltura línea 37.5 x 40 cm	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Ensamble	
Descripción	Parámetros de uso
Mesa de acero inoxidable.	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte (cuando aplique).	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.

PRODUCTO:

TIJERA Y PINZA

CATÁLOGO:

ETP001-51


VERSIÓN:


01

CÓDIGO:

IEPR-ETP001-51

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:

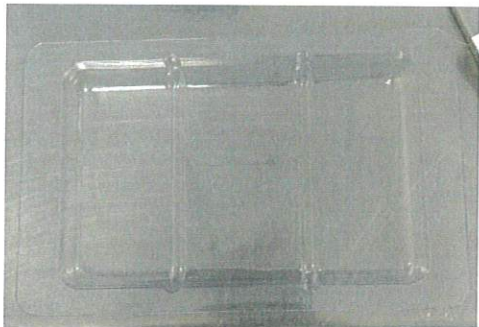1	Colocar sobre la mesa de trabajo 1 charola termoformada.	2	Colocar 1 sobre con aplicador (es) con alcohol isopropilico al 70 %.
 		 	
Criterio:	Se coloca de forma horizontal.	Criterio:	Se coloca dentro de la charola termoformada del lado derecho.

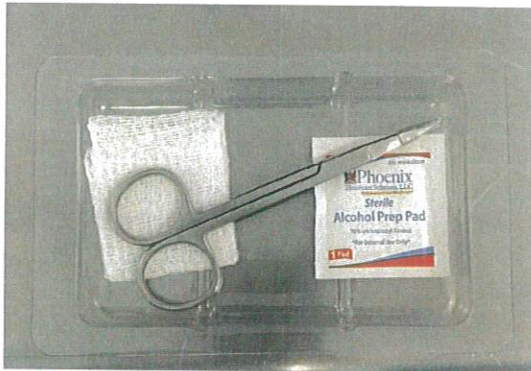3	Colocar 1 gasa de 5 x 5 cm.	4	Colocar 1 tijera iris recta.
 		 	
Criterio:	Se coloca dentro de la charola termoformada del lado izquierdo.	Criterio:	Se coloca encima de la gasa y el sobre con aplicador, de forma diagonal con la punta de la tijera hacia el lado superior derecho.

PRODUCTO:

TIJERA Y PINZA

CATÁLOGO:

ETP001-51


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR-ETP001-51

5 Colocar 1 pinza de disección sin dientes.

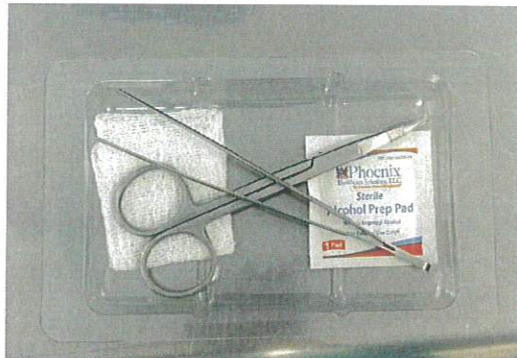




Criterio: Se coloca encima y a lo contrario de la tijera, de forma diagonal con la punta hacia el lado superior izquierdo formando una x.

6 Colocar 1 envoltura línea 37.5 x 40 cm en la mesa de trabajo.

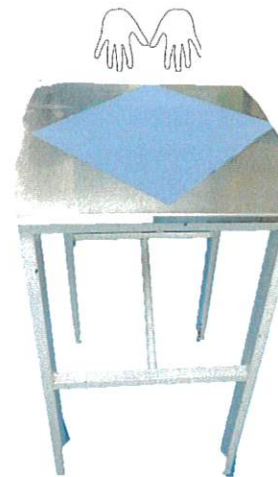

Criterio: Se coloca en forma de rombo.

7 Envolver: tomar la punta del punto A de la envoltura y doblar hacia arriba con dirección al punto B cubriendo el material ensamblado, Introducir la punta de la pestaña por debajo del producto ensamblado jalando y apretando sin soltar ningún dobles.

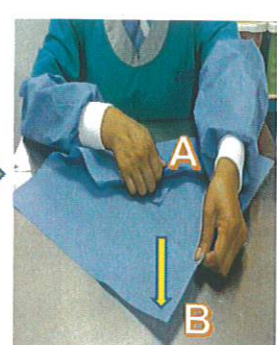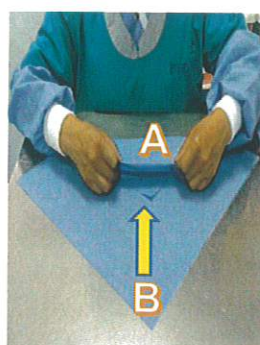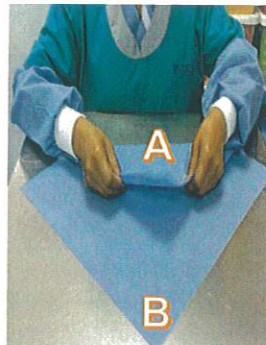

Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado.

 
COPIA CONTROLADA

No. 1

PRODUCTO:

TIJERA Y PINZA

CATÁLOGO:

ETP001-51

VERSIÓN:


01

CÓDIGO:

IEPR- ETP001-51

8

Del punto C se realiza un pequeño doblé hacia dentro, para formar una pequeña pestaña, sin soltar la pestaña se hará un doblé de derecha a izquierda.

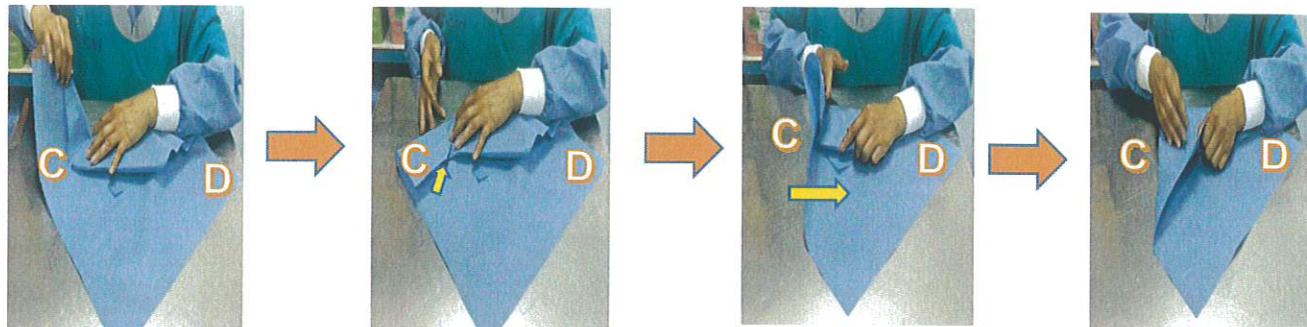


Criterio:

Apretar con la envoltura el equipo ensamblado sin soltar ningún doblé.

9

Del punto D se realiza un pequeño doblé hacia dentro, para formar una pequeña pestaña, sin soltar la pestaña se hará un doblé de izquierda a derecha.

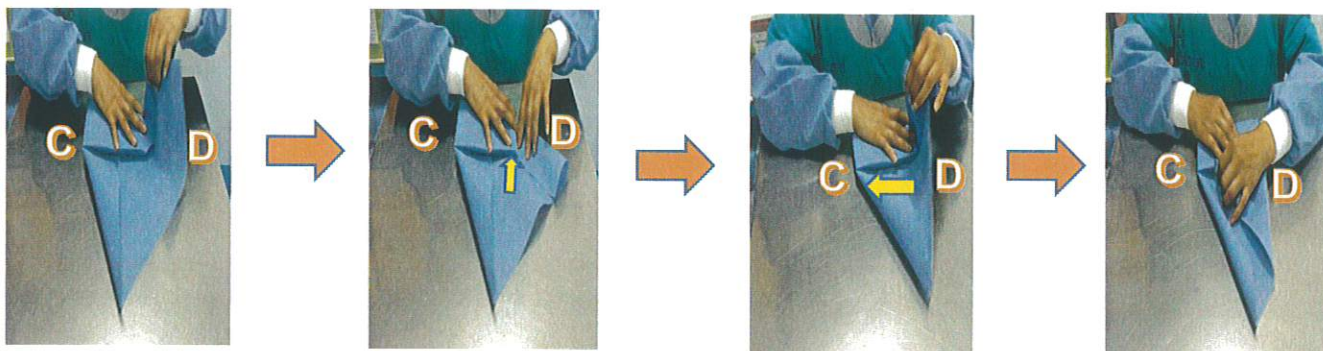

Criterio:

Apretar con la envoltura el equipo ensamblado sin soltar ningún doblé.

PRODUCTO:

TIJERA Y PINZA

CATÁLOGO:

ETP001-51


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:





IEPR-ETP001-51

- 10 Dar un pequeño doblez hacia dentro de los puntos C y D para formar la pestaña triangular.

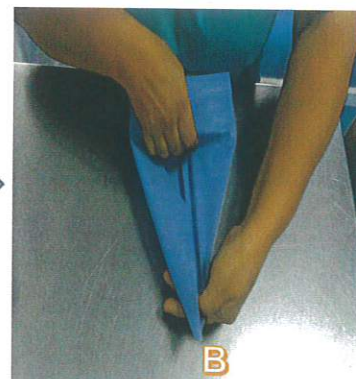

Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado sin soltar ningún dobles.

- 11 Tomar la punta de la pestaña en forma de triángulo (punto B) y doblar por arriba hacia el punto A cubriendo el paquete ensamblado y sin soltar girar a 180° el material.

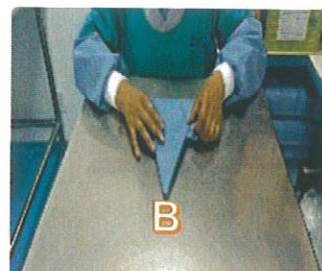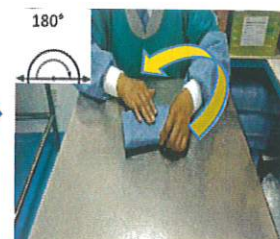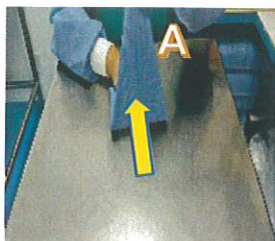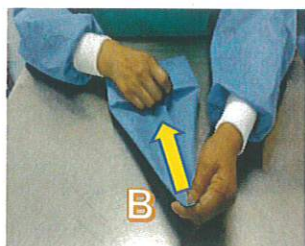

Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado sin soltar ningún dobles.

PRODUCTO:

TIJERA Y PINZA

CATÁLOGO:

ETP001-51

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- ETP001-51

- 12 Tomar la pestaña triangular (punto B) y dar un pequeño doblez hacia dentro de los puntos D y C dejando una pequeña pestaña triangular (referencia) como se muestra en la imagen.



Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado sin soltar ningún dobles.

- 13 Resultado final.



Criterio: No debe quedar flojo.

4. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

 
COPIA CONTROLADA

No. 1

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A



INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

PRODUCTO:

TIJERA Y PINZA

CATÁLOGO:

ETP001-51

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-ETP001-51

SUSTITUYE A:

VIGENCIA:

PROXIMA REVISIÓN:

NUEVO

3 años

OCT - 2028

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

Carolina Hernández Hernández

Producción

FECHA: 14-OCT-2025

IqI. Sergio Bautista Sampedro

Coordinador de Producción

FECHA: 15-OCT-2025

QFB. Yazmin Yarely Reyes Silva

Responsable Sanitario

FECHA: 16-OCT-2025

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Acondicionamiento Primario		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Bolsa mixta para esterilizar	1
2	Etiqueta primaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización (cuando aplique)	1
Acondicionamiento Secundario		
1	Caja doble corrugado 54x29x28 cm	1
2	Etiqueta secundaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Acondicionamiento Primario	
Descripción	Parámetros de uso
Selladora de banda	180°C a 200°C
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.
Despachador de cinta indicadora de esterilización (cuando aplique)	20 mm en modo automático o semiautomático

Acondicionamiento Secundario	
Descripción	Parámetros de uso
Despachador de cinta indicadora de esterilización (opcional el uso de tijeras)	20 mm en modo automático o semiautomático
Contenedores de manipulación y transporte	Limpios y libre de contaminación
Máquina precintadora	30 cm de ancho x 29 de altura

COPIA CONTROLADA

No. 1

PRODUCTO:

TIJERA Y PINZA

CATÁLOGO:

ETP001-51

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-ETP001-51

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO:

1	Etiquetar el empaque primario (bolsa).	2	Introducir el producto dentro del empaque primario.
			
Criterio:	La etiqueta debe de estar libre de cualquier daño que afecte su legibilidad como arrugas, pliegues o cortaduras se coloca de forma horizontal. Nota: la cinta indicadora de esterilización se coloca cuando sea requerido.	Criterio:	Se introduce el paquete como se muestra en la imagen.
3	Sellar el empaque primario.	4	Almacenar en los contenedores.
			
Criterio:	No debe contener pliegues, perforaciones, burbujas, arrugas o interrupciones en el sello que pongan en riesgo la esterilidad del producto.	Criterio:	Para la manipulación y transporte.

PRODUCTO:

TIJERA Y PINZA

CATÁLOGO:

ETP001-51

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-ETP001-51

4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO:

1	Empacar como se muestra en la imagen.	2	Sellar la caja con la maquina precintadora.
			
Criterio:	Colocar de frente vs frente cada producto, hacer pares y empacar la cantidad conforme al factor de empaque.	Criterio:	Como se muestra en la imagen.

3	Colocar etiqueta secundaria al frente con la cinta indicadora de esterilización. En caso de tratarse de una caja parcial, colocar la etiqueta de "restos-caja parcial" en esquina superior derecha. Colocar sello en la parte inferior derecha del empaque secundario.
 Etiqueta de identificación caja parcial Cinta indicadora de esterilización Sello Formato de sello COD DD MM AA COD: Código de la máquina. DD: DIA Los 2 dígitos del día. MM: MES Los 2 dígitos del mes. AA: AÑO Últimos 2 dígitos del año. 0 2 9 0 4 0 4 2 5 EJEMPLO	
Criterio:	El sello indica los últimos 3 dígitos de la máquina, así como el día, mes y año en que se realizó el acondicionamiento. La etiqueta no debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar como se muestra la imagen.

PRODUCTO:
TIJERA Y PINZA

CATÁLOGO:

ETP001-51


VERSIÓN:

01


CÓDIGO:

IAPS-ETP001-51

- 4 Estibar conforme a la imagen: máximo 7 camas. Seis camas con 7 cajas cada una y una cama con 8 cajas.

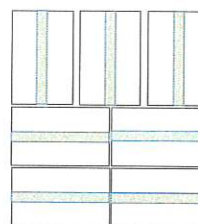

Cama 1

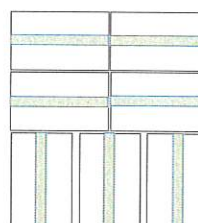

Cama 2

Criterio:

ESTIBA: T-100 cm x120 cm.

5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Empaque primario frágil manipular con cuidado.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A