

PRODUCTO:
DESCONEXIÓN DE CATÉTER DE HEMODIÁLISIS I

CATÁLOGO:

EDH001-49

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-EDH001-49

SUSTITUYE A:
VIGENCIA:
PROXIMA REVISIÓN:

Nuevo

3 años

AGO - 2028

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:





Carolina Hernández Hernández

Iqil Sergio Bautista Sampedro

Il. Alan Christian Galicia Castillo

Producción

Coordinador de Producción

Responsable Sanitario

FECHA: 05-AGO-2025

FECHA: 06-AGO-2025

FECHA: 07-AGO-2025

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Ensamble		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Plato ovalado	1
2	Apósitos transparentes 10 x 12 cm	2
3	Toallas con gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70%	4
4	Gasas 10 x 10 cm	3
5	Blíster con dos tapones luer lock	1
6	Guantes para exploración medianos	2
7	Envoltura plana 35g-40g 50 x 50 cm	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Ensamble	
Descripción	Parámetros de uso
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte (cuando aplique)	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.

PRODUCTO:

DESCONEXIÓN DE CATÉTER DE HEMODIÁLISIS I

CATÁLOGO:

EDH001-49


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-EDH001-49

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:

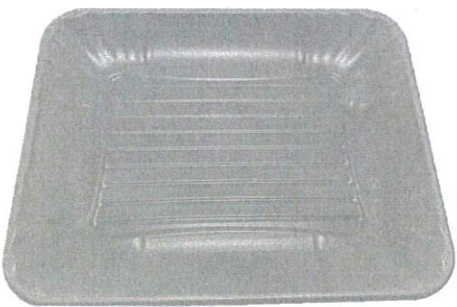1	Coloca sobre la mesa de trabajo 1 plato ovalado.	2	Colocar 2 apósitos transparentes 10 x 12 cm.
 		 	
Criterio:	Se coloca de forma horizontal.	Criterio:	Se colocan sobre el plato ovalado.

3	Colocar 4 toallas con gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70%.	4	Colocar 3 gasas 10 x 10 cm.
 		 	
Criterio:	Se colocan sobre los apósitos transparentes 10 x 12 cm del lado derecho.	Criterio:	Se colocan sobre los apósitos transparentes 10 x 12 cm del lado izquierdo.

 **innplast** 
COPIA CONTROLADA

No. 1

PRODUCTO:

DESCONEXIÓN DE CATÉTER DE HEMODIÁLISIS I

CATÁLOGO:

EDH001-49

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-EDH001-49

5 Colocar 1 blíster con dos tapones luer lock.



Criterio:

Se coloca encima de las gasas 10 x 10 cm que se encuentran del lado izquierdo.

6 Colocar 2 guantes para exploración medianos.



Criterio:

Por último se colocan los guantes quedando encima del blíster con dos tapones luer lock manera que los dedos apunten al lado derecho.

7 Colocar 1 envoltura plana 35g-40g 50 x 50 cm.



Criterio:

La envoltura se coloca en forma de rombo sobre la mesa de trabajo.

PRODUCTO:

DESCONEXIÓN DE CATÉTER DE HEMODIÁLISIS I

CATÁLOGO:

EDH001-49


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR-EDH001-49

8 Envolver: tomar la punta del punto A y doblar por arriba hacia el punto B cubriendo el material ensamblado.

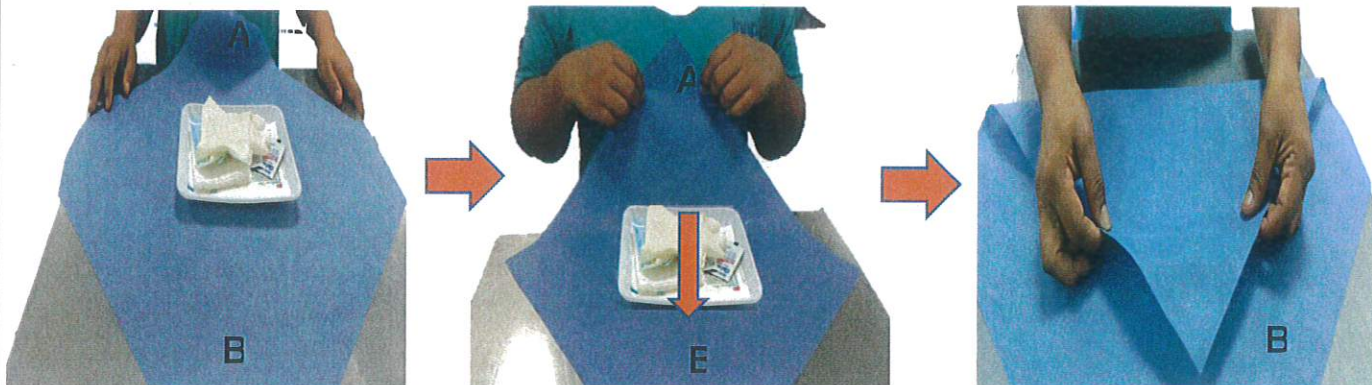

Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado sin soltar ningún dobles.

9 Introducir la punta de la pestaña por debajo del producto ensamblado jalando y apretando sin soltar ningún dobles.

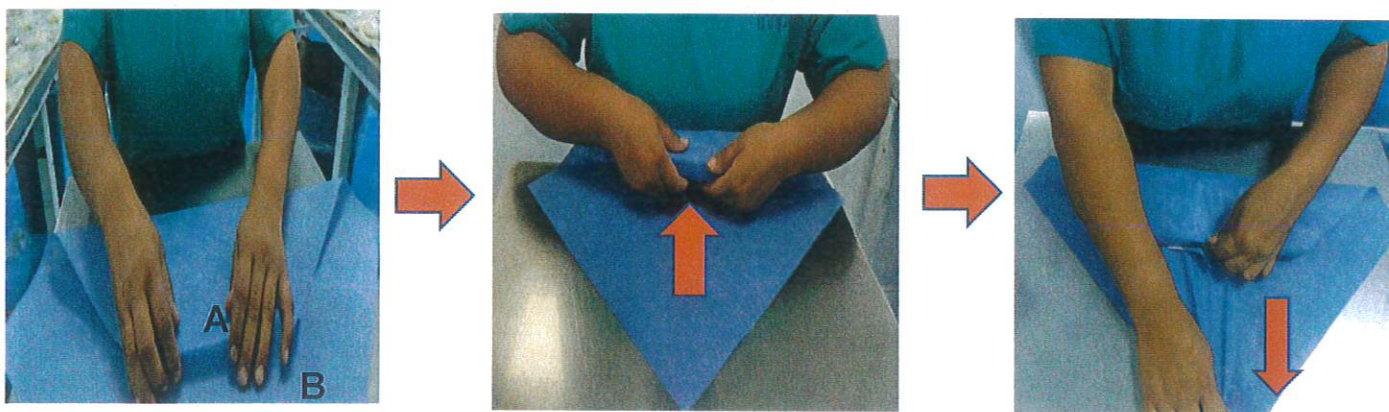

Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado sin soltar ningún dobles.

 **innplast** 
COPIA CONTROLADA
No. 1

PRODUCTO:

DESCONEXIÓN DE CATÉTER DE HEMODIÁLISIS I

CATÁLOGO:

EDH001-49

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-EDH001-49

10

Del punto C se realiza un pequeño dobles hacia adentro para formar una pequeña pestaña sin soltar la pestaña se hará un dobles hacia el lado derecho apretando y sujetando el material ensamblado.




Criterio:

Apretar con la envoltura el equipo ensamblado sin soltar ningún dobles.

11

Del punto D se realiza un pequeño dobles hacia dentro, para formar una pequeña pestaña, sin soltar la pestaña se hará un dobles hacia el lado izquierdo apretando y sujetando el material ensamblado.

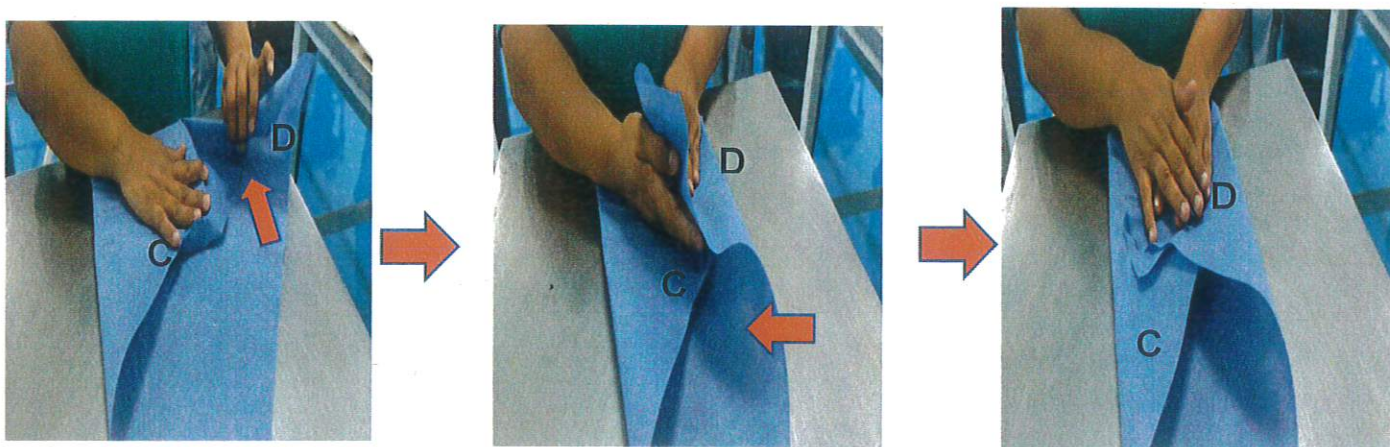

Criterio:

Apretar con la envoltura el equipo ensamblado sin soltar ningún dobles.


innplast 
 COPIA CONTROLADA
 No. 1

PRODUCTO:

DESCONEXIÓN DE CATÉTER DE HEMODIÁLISIS I

CATÁLOGO:

EDH001-49


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-EDH001-49

- 12 Dar un pequeño doblez hacia dentro de los puntos C y D para formar la pestaña triangular.

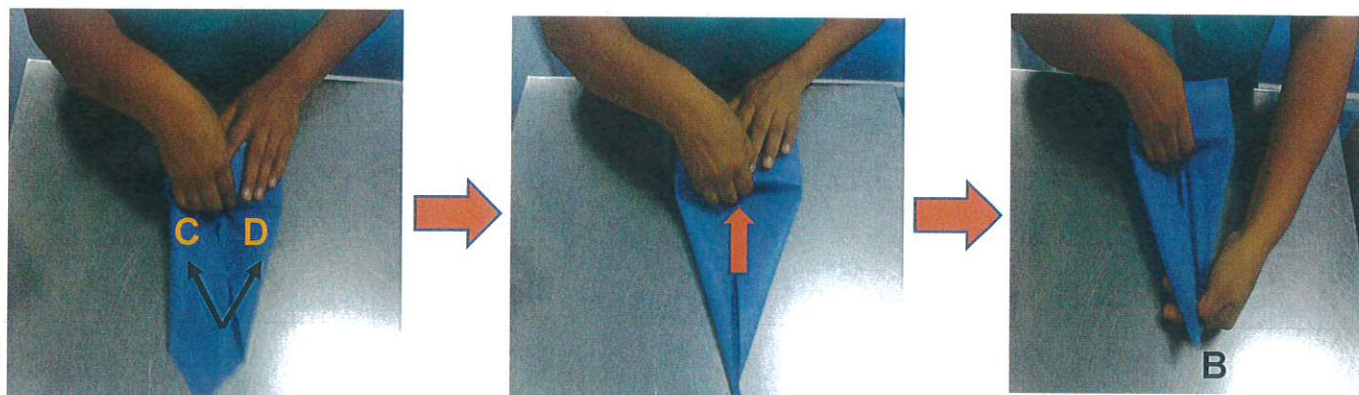

Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado sin soltar ningún dobles.

- 13 Tomar la punta de la pestaña en forma de triángulo (punto B) y doblar por arriba hacia el punto A cubriendo el paquete ensamblado y sin soltar girar a 180° el material.



Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado sin soltar ningún dobles.

 **innplast** 
COPIA CONTROLADA

No. 1

PRODUCTO:

DESCONEXIÓN DE CATÉTER DE HEMODIÁLISIS I

CATÁLOGO:

EDH001-49


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR-EDH001-49

- 14 Tomar la pestaña triangular (punto B) y dar un pequeño doblez hacia dentro de los puntos C y D dejando la punta de la pestaña triangular (referencia).

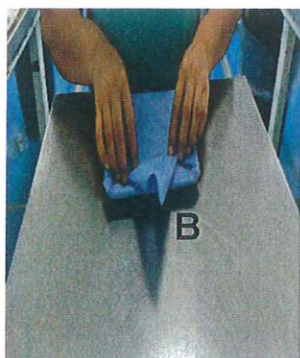

Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado sin soltar ningún dobles.

- 15 Resultado final.

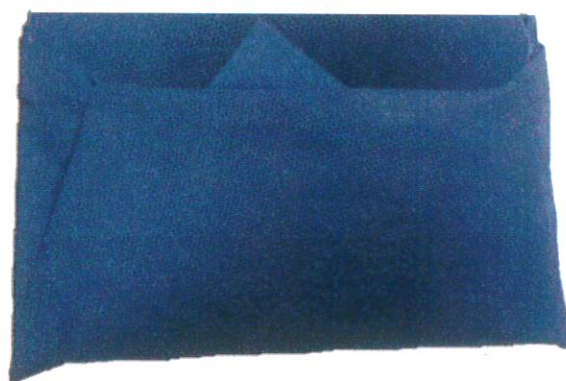

Criterio: No debe quedar flojo.



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO

PRODUCTO:

DESCONEXIÓN DE CATÉTER DE HEMODIÁLISIS I

CATÁLOGO:

EDH001-49

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR-EDH001-49

4. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:



Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A


innplast 
COPIA CONTROLADA
No. 1

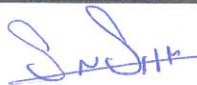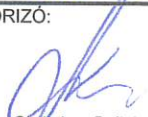		INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO			
PRODUCTO: DESCONEXIÓN DE CATÉTER DE HEMODIÁLISIS I					
CATÁLOGO:	EDH001-49	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IAPS-EDH001-49
SUSTITUYE A: Nuevo		VIGENCIA: 3 años		PROXIMA REVISIÓN: AGO-2028	
ELABORÓ:  Carolina Hernández Hernández Producción FECHA: 05-AGO-2025		REVISÓ:  IQL Sergio Bautista Sampedro Coordinador de Producción FECHA: 06-AGO-2025		AUTORIZÓ:  II. Alan Christian Galicia Castillo Responsable Sanitario FECHA: 07-AGO-2025	

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Acondicionamiento Primario		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Bolsa mixta para esterilizar	1
2	Etiqueta primaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización (cuando aplique)	1
Acondicionamiento Secundario		
1	Caja doble corrugado 54x29x28 cm	1
2	Etiqueta secundaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Acondicionamiento Primario	
Descripción	Parámetros de uso
Selladora de banda	180°C a 200°C
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.
Despachador de cinta indicadora de esterilización (cuando aplique)	20 mm en modo automático o semiautomático, limpio y libre de contaminación.

Acondicionamiento Secundario	
Descripción	Parámetros de uso
Despachador de cinta indicadora de esterilización (opcional el uso de tijeras)	20 mm en modo automático o semiautomático, limpio y libre de contaminación.
Máquina precintadora	30 cm de ancho x 29 cm de altura


COPIA CONTROLADA
 No. 1

PRODUCTO

DESCONEXIÓN DE CATÉTER DE HEMODIÁLISIS I

CATÁLOGO:

EDH001-49

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-EDH001-49

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO:

1	Etiquetar el empaque primario (bolsa).	2	Introducir el producto dentro del empaque primario.
			
Criterio:	La etiqueta debe de estar libre de cualquier daño que afecte su legibilidad no debe tener arrugas, pliegues o cortaduras, se coloca de forma horizontal. Nota: la cinta indicadora de esterilización se coloca cuando sea requerido.	Criterio:	Se introduce el paquete ensamblado como se muestra en la imagen.
3	Sellar el empaque primario.	4	Almacenar en contenedores.
			
Criterio:	No debe tener pliegues, perforaciones, burbujas, arrugas o interrupciones en el sello que pongan en riesgo la esterilidad del producto.	Criterio:	Para la manipulación y transporte.

PRODUCTO

DESCONEXIÓN DE CATÉTER DE HEMODIÁLISIS I

CATÁLOGO:

EDH001-49

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-EDH001-49

4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO:

1	Empacar como se muestra en la imagen.	2	Sellar la caja con la maquina precintadora.
			
Criterio:	Colocar de frente vs frente cada producto, hacer pares y empackar la cantidad conforme al factor de empaque.	Criterio:	Como se muestra en la imagen.

3	Colocar etiqueta secundaria al frente con la cinta indicadora de esterilización. En caso de tratarse de una caja parcial, colocar la etiqueta de "restos-caja parcial" en esquina superior derecha. Colocar sello en la parte inferior derecha del empaque secundario.
 Cinta indicadora de esterilización Identificación de etiqueta caja parcial Sello Formato de sello COD DD MM AA COD: Código de la máquina. DD: DIA Los 2 dígitos del día. MM: MES Los 2 dígitos del mes. AA: AÑO Últimos 2 dígitos del año. 029040425 EJEMPLO	
Criterio:	El sello indica los últimos 3 dígitos de la máquina, así como el día, mes y año en que se realizó el acondicionamiento. La etiqueta no debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar como se muestra la imagen.

PRODUCTO

DESCONEXIÓN DE CATÉTER DE HEMODIÁLISIS I

CATÁLOGO:

EDH001-49


VERSIÓN:

01


CÓDIGO:

IAPS-EDH001-49

- 4 Estibar conforme a la imagen: máximo 7 camas. Seis camas con 7 cajas cada una y una cama con 8 cajas.

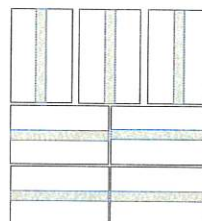

Cama 1

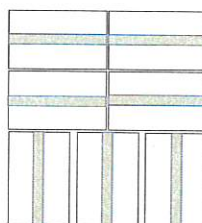

Cama 2

Criterio: ESTIBA: T-100 cm x120 cm

5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Empaque primario frágil manipular con cuidado.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A