



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 8 Fr

CATÁLOGO:

EAS201-25

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- EAS201-25

SUSTITUYE A:

Nuevo

VIGENCIA:

3 años

PROXIMA REVISIÓN:

MAY-2028

ELABORÓ:

Areli Jazmín Guevara Galindo
Producción

FECHA: 09-MAY-2025

REVISÓ:

I.Q.I. Sergio Bautista Sampedro
Coordinador de Producción

FECHA: 09-MAY-2025

AUTORIZÓ:

I.I. Alan Christian Galicia Castillo
Responsable Sanitario

FECHA: 09-MAY-2025

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Ensamble		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Plato ovalado	1
2	Recipiente sin tapa de 236 ml (8 oz)	1
3	Toalla para secado de manos	1
4	Gasas de 10 x 10 cm	2
5	Guantes medianos para exploración	2
6	Envoltura 57 x 57 cm	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Ensamble	
Descripción	Parámetros de uso
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas.
Contenedores de manipulación y transporte (Cuando aplique)	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón.

innplast

COPIA CONTROLADA

No. 1

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 8 Fr

CATÁLOGO:

EAS201-25

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- EAS201-25

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE:

1	Colocar sobre la mesa de trabajo 1 plato ovalado	2	Colocar un recipiente sin tapa de 236 ml (8 oz)
 		 	
Criterio:	Se coloca horizontalmente.	Criterio:	Se coloca de lado derecho del plato

innplast
 COPIA CONTROLADA
 No. 1

3	Colocar 2 gasas de 10 x 10 cm sobre el plato ovalado	4	Colocar 1 toalla para secado de manos sobre las 2 gasas y el deposito
 		 	
Criterio:	Se coloca centrado a la izquierda del plato ovalado.	Criterio:	Las costillas de la toalla para secado de manos están orientadas del lado derecho y parte superior.

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 8 Fr

CATÁLOGO:

EAS201-25

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- EAS201-25

5 Colocar 2 guantes medianos para exploración

Vista Superior




Vista Frontal



Criterio: Los dedos del guante apuntan a la izquierda.

6 Sobre la mesa de trabajo se coloca la envoltura

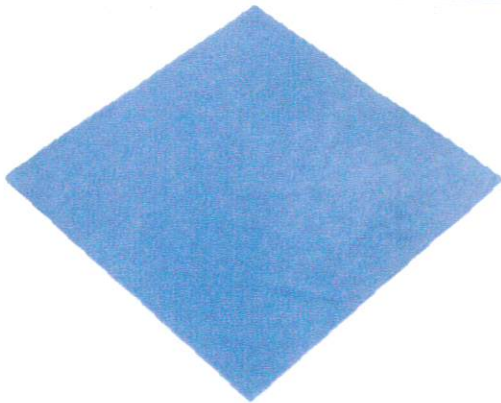

7 Se acomoda el equipo a envolver sobre la envoltura



Criterio: La envoltura se coloca en forma de rombo.

Criterio: Acomodar el equipo ensamblado como se muestra en el paso No. 7

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 8 Fr

CATÁLOGO:

EAS201-25


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- EAS201-25


8 Envolver. Doblar la punta inferior de la envoltura hacia arriba y dar un pequeño dobles hacia dentro del punto A y B

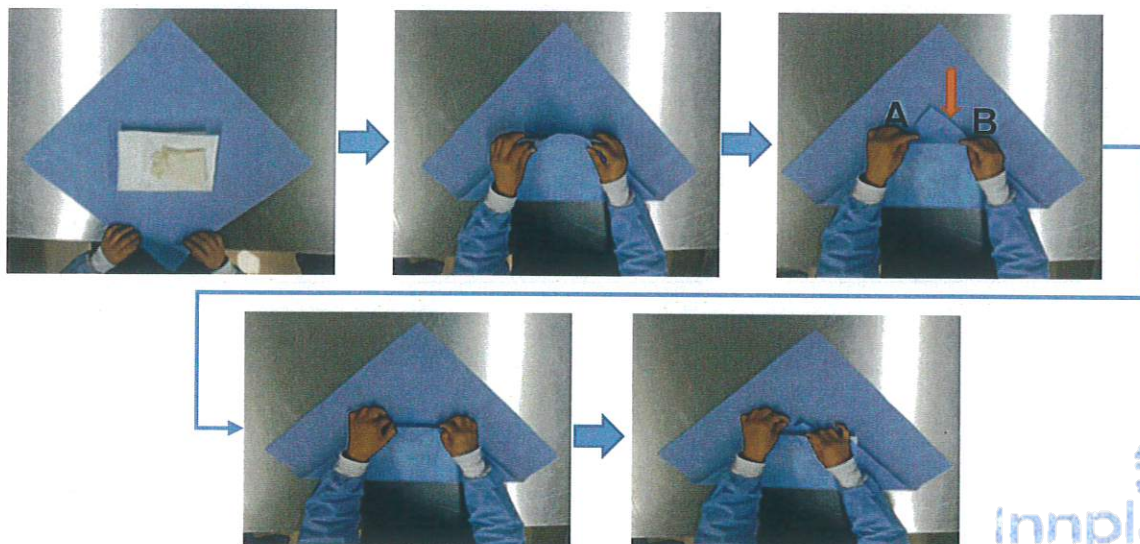

 **Innplast** 
COPIA CONTROLADA
 No. 1

Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado.

9 Del punto C realizar un pequeño dobles hacia dentro, para formar una pestaña. Del punto D doblar la pestaña hacia la izquierda y sujetar.

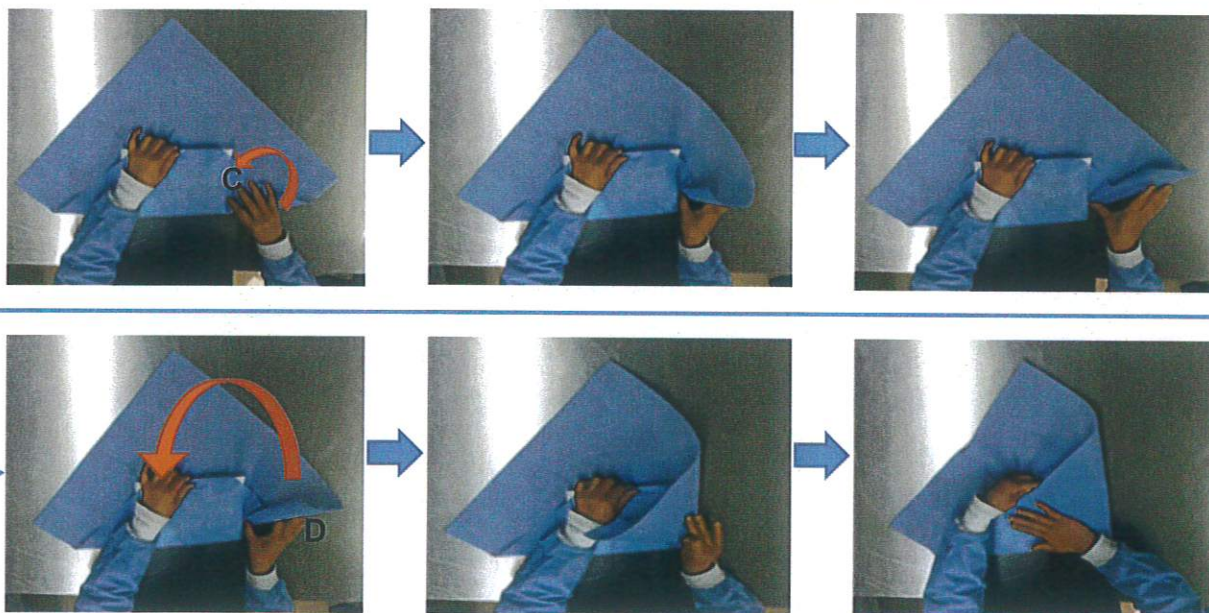

Criterio: Apretar con la envoltura el equipo ensamblado

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 8 Fr

CATÁLOGO:

EAS201-25


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- EAS201-25

10 Del punto E realizar un pequeño doblé hacia dentro, para formar una pestaña.
Del punto F doblar la pestaña hacia la derecha y sujetar.

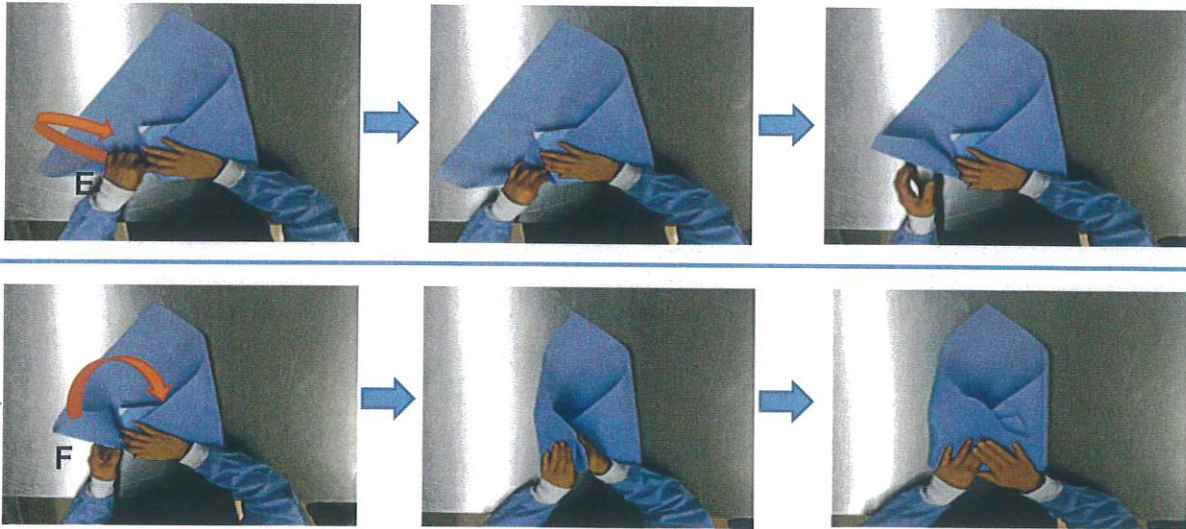


Criterio: Apretar el equipo con la envoltura.

 **innplast** 
COPIA CONTROLADA

11 Dar un pequeño doblé hacia dentro de los puntos G y H para formar la pestaña triangular.

No. 1

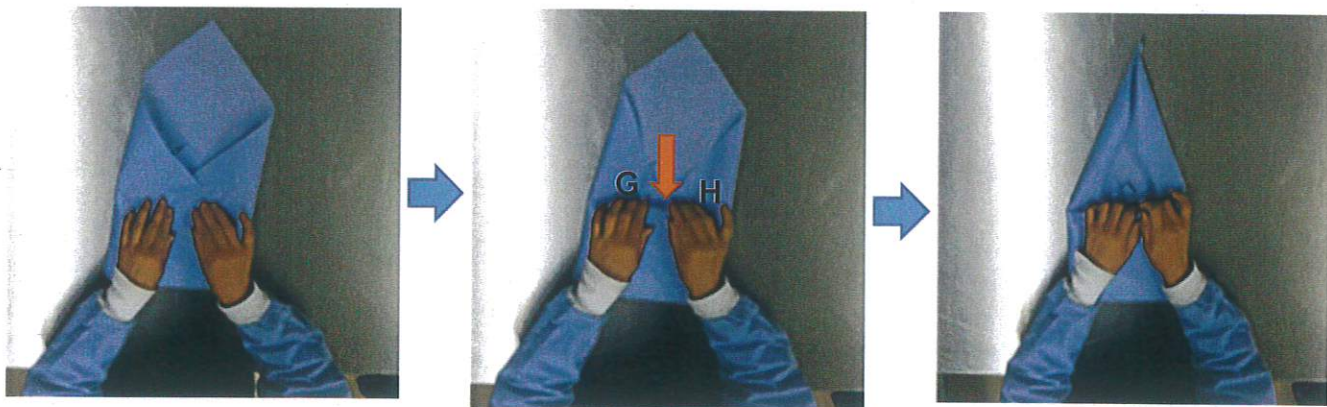

Criterio: No soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desenvuelva.

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 8 Fr

CATÁLOGO:

EAS201-25

VERSIÓN:

01

CÓDIGO:


IEPR- EAS201-25

12 Tomar la punta de la pestaña (punto H) y doblar hacia la parte inferior.



Criterio: No soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desvuelva.

13 Girar 180 ° el equipo ensamblado

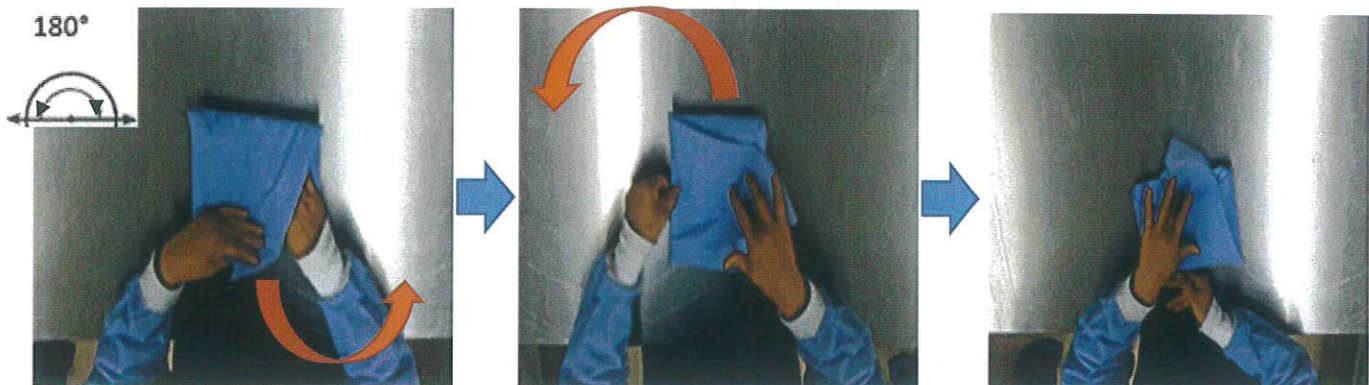

Criterio: No soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desvuelva.

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 8 Fr

CATÁLOGO:

EAS201-25


VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IEPR- EAS201-25

14 Dar un pequeño doblez hacia dentro de los puntos I y J para formar la pestaña triangular (referencia)

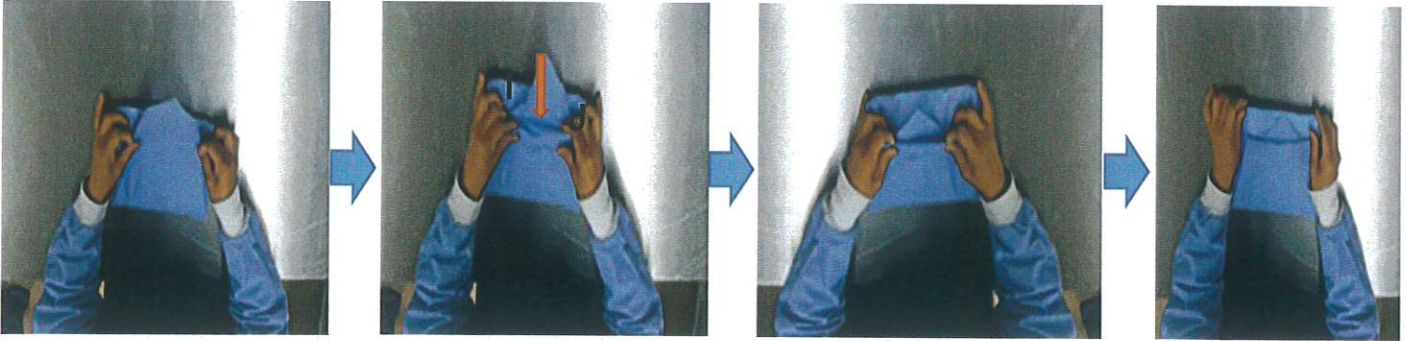

Criterio:

No soltar los dobles realizados anteriormente, apretar para que no se desenvuelva.

15 Presentación final de la envoltura del equipo



Criterio:

El equipo envuelto no debe quedar flojo.



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE DE PRODUCTO

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 8 Fr

CATÁLOGO:	EAS201-25	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IEPR- EAS201-25
-----------	-----------	----------	----	---------	-----------------

4. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Empaque primario frágil manipular con cuidado.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento (usar tapa si estos quedaran retenidos para su acondicionamiento subsecuente).

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A


innplast 
COPIA CONTROLADA
No. 1



INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 8 Fr

CATÁLOGO:	EAS201-25	VERSIÓN:	01	CÓDIGO:	IAPS-EAS201-25
SUSTITUYE A:		VIGENCIA:		PROXIMA REVISIÓN:	
Nuevo		3 años		MAY 2025	
ELABORÓ: Areli Jazmín Guevara Galindo Producción FECHA: 09-MAY-2025		REVISÓ: I.Q.I. Sergio Bautista Sampedro Coordinador de Producción FECHA: 09-MAY-2025		AUTORIZÓ: I.I. Alan Christian Galicia Castillo Responsable Sanitario FECHA: 09-MAY-2025	

1. INSUMOS REQUERIDOS:

Acondicionamiento Primario		
Ítem	Insumo	Cantidad
1	Bolsa para esterilizar	1
2	Etiqueta primaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización (aplica cuando lo solicite el cliente)	1
Acondicionamiento Secundario		
1	Caja cartón doble corrugado 54x29x28 cm	1
2	Etiqueta secundaria	1
3	Cinta indicadora de esterilización	1
Observaciones: Descripciones específicas en la OP		



No. 1

2. EQUIPO A UTILIZAR:

Acondicionamiento Primario	
Descripción	Parámetros de uso
Selladora de banda	180°C a 200°C
Mesa de acero inoxidable	Libre de contaminación, astillas, manchas, cintas adhesivas
Contenedores de manipulación y transporte (Cuando aplique)	Limpios, libres de contaminación, astillas, cartón
Despachador de cinta indicadora de esterilización (aplica cuando el cliente lo solicite)	20 mm en modo automático o semiautomático. Limpio y libre de contaminación
Tijeras (Para el refile de bolsa cuando aplique o para cortar la cinta indicadora de esterilización)	Limpias y libre de contaminación

Acondicionamiento Secundario	
Descripción	Parámetros de uso
Despachador de cinta indicadora de esterilización (opcional el uso de tijeras)	20 mm en modo automático o semiautomático. Limpio y libre de contaminación
Máquina precintadora	29 cm de alto x 28.5 cm de ancho para el sellado.

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 8 Fr

CATÁLOGO:

EAS201-25



VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-EAS201-25

3. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO:

1	Etiquetar el empaque primario (bolsa)	2	Introducir el producto dentro del empaque primario
			
Criterio:	No debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar al centro de manera horizontal o vertical. NOTA: Solo se coloca la cinta testigo en la etiqueta cuando el cliente lo solicite.	Criterio:	Como se muestra en la imagen

3	Sellar el empaque primario mínimo a 1 cm de la apertura de la bolsa con la máquina selladora	4	Almacenar en los contenedores
			
Criterio:	Pliegues, perforaciones, burbujas, arrugas o Interrupciones en el sello que pongan en riesgo la esterilidad del producto.	Criterio:	Cuando aplique para manipulación y transporte

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 8 Fr

CATÁLOGO:

EAS201-25



VERSIÓN:

01

CÓDIGO:

IAPS-EAS201-25


4. SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO:

1	Empacar como se muestra en la imagen	2	Sellar la caja con la maquina precintadora
			
Criterio:	Colocar de frente cada producto película vs película, hacer pares y empacar la cantidad conforme al factor de empaque	Criterio:	Como se muestra en la imagen

innplast medpol
COPIA CONTROLADA

No. 1

3	Colocar etiqueta secundaria al frente con la cinta indicadora de esterilización En caso de tratarse de una caja parcial, colocar la etiqueta de "Restos-Caja Parcial" en esquina superior derecha Colocar el sello en la parte inferior derecha del empaque secundario, indicando los últimos tres dígitos de la máquina, así como el día, mes y año en que se realizó el acondicionamiento
---	---



FORMATO DEL SELLO

COD DD MM AA

COD: Código de la máquina.	DD: DIA Los 2 dígitos del día.	MM: MES Los 2 dígitos del mes.	AA: AÑO Últimos 2 dígitos del año.
----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

029040425

EJEMPLO

Criterio:	La etiqueta no debe contener arrugas, pliegues o cortaduras, colocar como se muestra la imagen La caja no debe estar, rota, sucia o manchada
-----------	---

PRODUCTO:

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 8 Fr

CATÁLOGO:

EAS201-25


VERSIÓN:

01


CÓDIGO:

IAPS-EAS201-25

4 Estibar conforme a la imagen: máximo 7 camas. Seis camas con 7 cajas cada una y una cama con 8 cajas

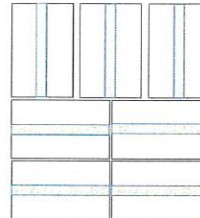

Cama 1

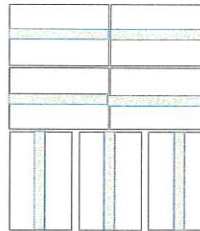

Cama 2

Criterio: ESTIBA: T-100x120 cm

5. CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Evite el contacto directo con la luz del sol.

No se exponga a la humedad mayor a 65%.

Empaque primario frágil manipular con cuidado.

Usar los contenedores de transporte y almacenamiento (usar tapa si estos quedaran retenidos para su acondicionamiento subsecuente).

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A